



[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920

For the latest User Installation Guide and StyleLink Software Download please visit:

Encontrará la versión más reciente del manual de instalación del usuario y el software de StyleLink en:

Si vous souhaitez télécharger le dernier manuel d'installation de l'utilisateur ou le logiciel StyleLink, rendez-vous sur :

Den neuesten Installationsleitfaden für Benutzer sowie den neuesten StyleLink-Softwaredownload finden Sie unter:

Voor de nieuwste Installatiehandleiding voor de gebruiker en voor het downloaden van StyleLink-software gaat u naar:

Per scaricare le versioni più recenti del manuale di installazione e del software StyleLink, andare al sito:

De senaste versionerna av installationshandledningen och nedladdning av programvaran för StyleLink finns på:

最新版ユーザインストールガイドとスタイルリンク ソフトウェアは次のサイトでダウンロードできます。

请从下列地址获取最新版本的用戶安裝指南和 StyleLink 软件下载：

StyleLink

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

User's Guide - English

Guía del usuario - Español

Manuel de l'utilisateur - Français

Gebruikersgids - Nederlands

Benutzerhandbuch - Deutsch

Guida per l'utente - Italiano

Användarhandbok - svenska

ユーザーガイド：日本語

用戶指南：汉语



**WICHTIG!** Bei diesem Produkt muss nach der Montage die Spannung eingestellt werden. Vor der Anpassung von Bewegungsumfang oder Spannung sicherstellen, dass die gesamte Ausrüstung sachgemäß auf dem Produkt montiert wurde. Sobald Geräte zu diesem Produkt hinzugefügt oder geändert werden, wodurch sich ein anderes Gewicht ergeben kann, sollten die Anpassungsschritte wiederholt werden, um einen sicheren, optimalen Betrieb zu gewährleisten. Dieses Produkt sollte sich über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht anpassen lassen und an der eingestellten Position verbleiben. Sollte es bei dieser Bewegung Schwierigkeiten geben oder das Produkt nicht am eingestellten Punkt fixiert bleiben, ist die Einstellanleitung zu befolgen und die Spannung entsprechend zu lockern bzw. anzuziehen, um eine geschmeidige, reibungslose Bewegung zu erhalten. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu bemerken.

**Produkteigenschaften & Technische Daten ..... 2 - 4**

**Abmessungen ..... 5**

**Aufbau ..... 6 - 17**

**Einstellung ..... 14-15**

**Batterieaufladung/-entladung ..... 16**

**Auto-Lock-Schublade ..... 17**

**Wechseln Sie die Sicherung (1 Amp), und setzen Sie die Stromunterbrecher zurück. .... 18**

**Batterien des Stromversorgungssystems wechseln 19 - 20**

**Computerwagen-Lagerung (Langzeit/Kurzzeit) ..... 21**

**Ergonomie ..... 22**

**Wartung & Sicherheit ..... 22 - 25**

For service and warranty visit [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Si desea información de servicio y garantía, visite [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).

Ga voor service en garantie naar [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Per assistenza e la garanzia visitare [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Gå in på [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) för service och garanti

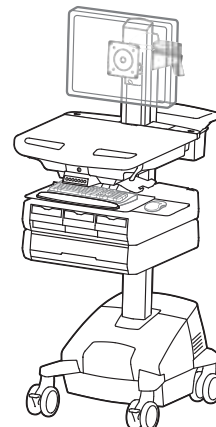
サービスおよび保証について詳しくは、[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) をご覧ください。

有关服务和保修，请访问 [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)









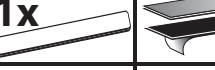

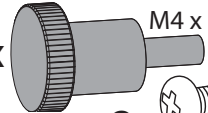

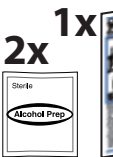


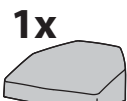



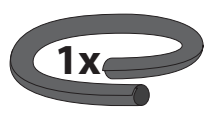

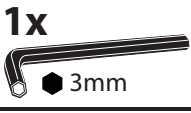
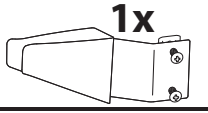



Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier:


<http://contact.ergotron.com>

888-24-212-G-00 rev. C • 11/12



**Die StyleView Computerwagen mit Stromversorgung liefern Wechselstrom für mobile Point-of-Care-Computersysteme im medizinischen Bereich. Die Wagen sind nicht für die Stromversorgung medizinischer Produkte oder Geräte vorgesehen. Die Steckdosen dienen ausschließlich zur Stromversorgung von IT-Geräten wie beispielsweise Computergeräten und Computerperipheriegeräten.**

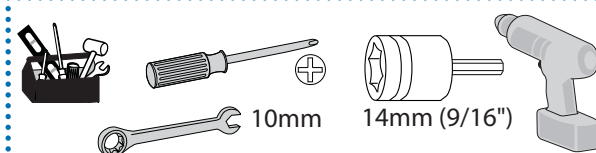	A	B
1	1x  12x 	4x  3x 
2	1x  1x 	2x 
3	1x  1x 	
4	4x  M4 x 10mm 8x  M4 x 10mm	2x  1x 
5	1x  1x 	1x  M4 x 8mm
6	1x  M4 x 8mm 1x  M4 x 5mm	1x 
7	1x  1x  3mm	1x 
8	1x  4x 	2x  M4 x 12mm



**! WARNUNG**

STOßGEFAHR!

**BEWEGLICHE TEILE KÖNNEN ZU QUETSCHUNGEN UND SCHNITTVERLETZUNGEN FÜHREN.**

**Verringern Sie die Lift-Spannung VOR folgenden Tätigkeiten:**

- Entfernen befestigter Geräte
- Transport des Computerwagens
- Lagern des Computerwagens

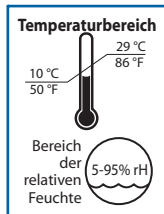
**So minimieren Sie die Lift-Spannung:**

1. Senken Sie die Arbeitsfläche auf die niedrigste Position ab.
2. Drehen Sie die Anpassungsmutter oben am Riser so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn. (Für die Anpassung können 40-60 Umdrehungen erforderlich sein.)


**Die Missachtung dieser Warnung kann zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschäden führen.**

Weitere Informationen und Anweisungen erhalten Sie im Produktleitfaden unter <http://4support.ergotron.com> oder telefonisch beim Ergotron-Kundendienst unter 1-800-888-8458.

822-052



**Betriebsbereit**

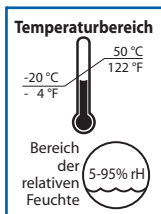

**Lagerung**

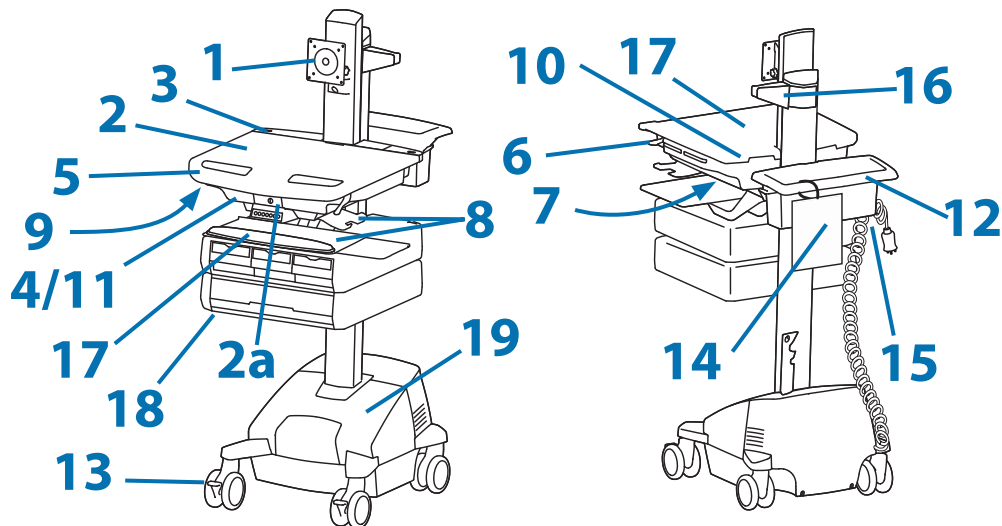
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## FCC-Konformitätserklärung

Der Computerwagen wurde getestet und gemäß Kapitel 15 der FCC-Bestimmungen als den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A entsprechend befunden. Diese Grenzwerte wurden entworfen, um weitgehenden Schutz gegen schädliche Interferenz zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese möglicherweise auch ausstrahlen; es kann möglicherweise schädliche Funkstörungen verursachen, wenn es nicht den Anweisungen im Handbuch des Herstellers entsprechend installiert wurde. Der Betrieb dieses Geräts in Wohnungen verursacht wahrscheinlich schädliche Interferenz. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, die Interferenz auf eigene Kosten zu beheben.

**Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Ergotron, Inc. genehmigt wurden, können den Verfall des Rechts zur Bedienung des Gerätes durch den Benutzer zur Folge haben.**



*Für Fragen und Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit wenden Sie sich an Ergotron.*



1. Höhenverstellbare LCD-Halterung für LCD-Bildschirme oder Tablet PCs mit Haltevorrichtungen in den Maßen 75 x 75 oder 100 x 100 mm
2. Arbeitsfläche 2a. Sperren und Freigeben der Arbeitsfläche
3. Bedienfeld
4. Sichere Aufbewahrung für Laptop, Thin Client oder CPU
5. Vorderer Griff
6. Höhenverstellbremse
7. USB-Hub für den Anschluss der USB-Kabel von Tastatur und Maus.
8. Mausablage lässt sich herausfahren und neigen; die Maus lässt sich durch eine befestigte Maushalterung rechts und links bedienen.
9. Tastaturbeleuchtung unter vorderem Griff
10. Tastaturbeleuchtungsschalter
11. Kabelführung und -ablage für nicht benötigte Kabel und Stromversorgungen
12. Ablagekorb und hinterer Griff
13. Arretierbare Laufrollen vorne
14. Kurzanleitung
15. Netzkabelhaken
16. Scannerhalterung
17. Antimikrobielle Beschichtung auf Arbeitsfläche und Handballenauflege
18. Auto-Lock-Schublade (Schubladenkonfigurationen auf Seite 3)
19. **Stromversorgung**

Das StyleView Stromversorgungssystem ermöglicht eine netzunabhängige Stromversorgung der Geräte auf dem Computerwagen. Das Stromversorgungssystem ist in den Fuß des Computerwagens integriert und umfasst zwei Batterien, ein Leistungsmodul, Bedienfeld, Steckerkasten und Netzkabel.

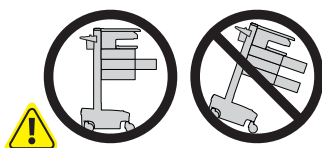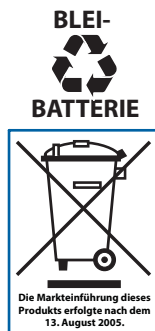- Bedienfeld: Über das auf der Arbeitsfläche befestigte Bedienfeld kann das Stromversorgungssystem ein- und ausgeschaltet bzw. der Batterieladestatus überwacht werden. Bei niedrigem Ladezustand ertönt ein Alarmton.
- Zwei 33-Ah-AGM-Bleibatterien, 12 Volt.
- Betriebstemperatur: min. 10°C und max. 29°C. Der empfohlene Feuchtigkeitsbereich für den Betrieb liegt zwischen 5 % und 95 % RH.
- Empfohlene Lagertemperatur für den Computerwagen: 15 °C. Bei dieser Temperatur ist der alterungsbedingte Kapazitätsverlust der Batterie verringert. Lagertemperatur: min. -20 °C und max. 50 °C. Der empfohlene Feuchtigkeitsbereich für die Lagerung liegt zwischen 5 % und 95 % RH.






**VORSICHT:** Vor dem Öffnen von Schubladen die Arbeitsfläche schließen. Nur immer jeweils eine Schublade öffnen. Den Wagen nicht schieben, wenn Schubladen oder die Arbeitsfläche offen sind. Ein Missachten dieser Anleitung kann zu einer Instabilität des Wagens führen.

## Produkteigenschaften & Technische Daten

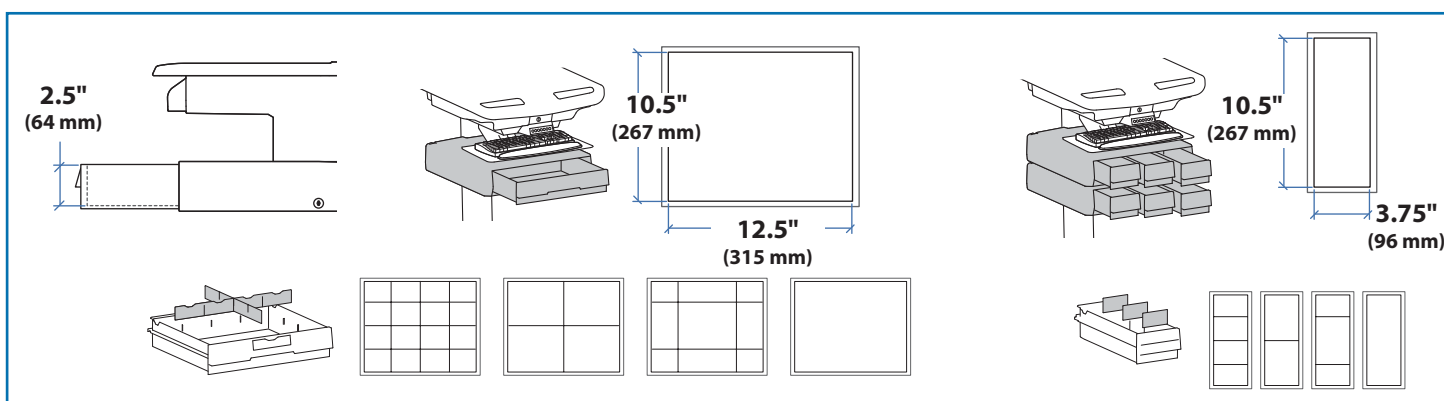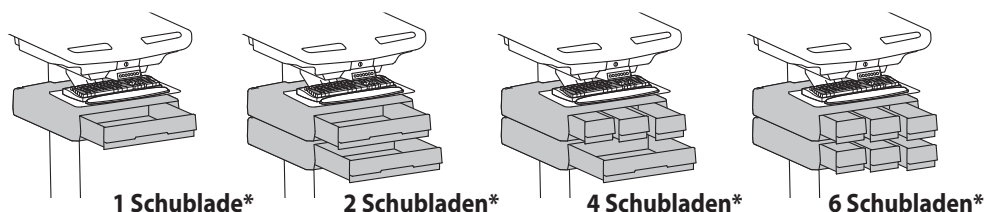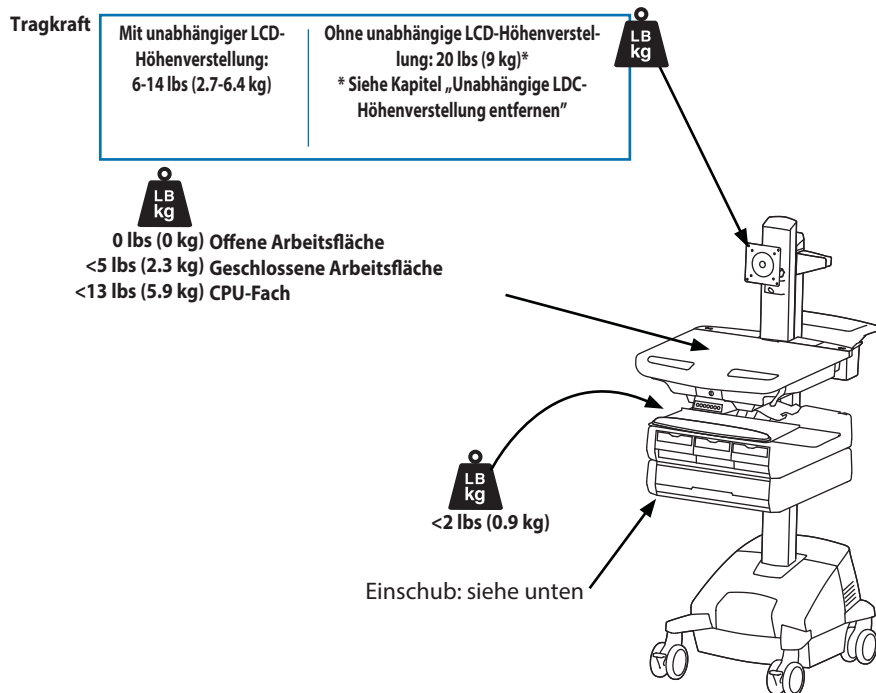Teilenummer	Stromversorgung	Auto-Lock-Schublade
SV42-3311-1	Eingang: 120 V~/60 Hz; 5.1A Ausgang: 120 V~/60 Hz, 400VA/300W. • Der Computerwagen und das Stromversorgungssystem sind zertifiziert nach UL 60601 und CAN/CSA-C22.2 601.1-M90.	1 Schublade*/16 Fächer
SV42-3321-1	Eingang: 120 V~/60 Hz; 5.1A Ausgang: 120 V~/60 Hz, 400VA/300W. • Der Computerwagen und das Stromversorgungssystem sind zertifiziert nach UL 60601 und CAN/CSA-C22.2 601.1-M90.	2 Schubladen*/32 Fächer
SV42-3341-1	Eingang: 120 V~/60 Hz; 5.1A Ausgang: 120 V~/60 Hz, 400VA/300W. • Der Computerwagen und das Stromversorgungssystem sind zertifiziert nach UL 60601 und CAN/CSA-C22.2 601.1-M90.	4 Schubladen*/28 Fächer
SV42-3361-1	Eingang: 120 V~/60 Hz; 5.1A Ausgang: 120 V~/60 Hz, 400VA/300W. • Der Computerwagen und das Stromversorgungssystem sind zertifiziert nach UL 60601 und CAN/CSA-C22.2 601.1-M90.	6 Schubladen*/24 Fächer
SV42-3311-2 SV42-3311-3	Eingang: 230 V~/50 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/50 Hz, 400 VA, 300W. • Der Computerwagen und das Power System sind zertifiziert nach EN 60601-1.	1 Schublade*/16 Fächer
SV42-3321-2 SV42-3321-3	Eingang: 230 V~/50 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/50 Hz, 400 VA, 300W. • Der Computerwagen und das Power System sind zertifiziert nach EN 60601-1.	2 Schubladen*/32 Fächer
SV42-3341-2 SV42-3341-3	Eingang: 230 V~/50 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/50 Hz, 400 VA, 300W. • Der Computerwagen und das Power System sind zertifiziert nach EN 60601-1.	4 Schubladen*/28 Fächer
SV42-3361-2 SV42-3361-3	Eingang: 230 V~/50 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/50 Hz, 400 VA, 300W. • Der Computerwagen und das Power System sind zertifiziert nach EN 60601-1.	6 Schubladen*/24 Fächer
SV42-3311-7 SV42-3311-8	Eingang: 230 V~/60 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/60 Hz, 400 VA, 300W.	1 Schublade*/16 Fächer
SV42-3321-7 SV42-3321-8	Eingang: 230 V~/60 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/60 Hz, 400 VA, 300W.	2 Schubladen*/32 Fächer
SV42-3341-7 SV42-3341-8	Eingang: 230 V~/60 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/60 Hz, 400 VA, 300W.	4 Schubladen*/28 Fächer
SV42-3361-7 SV42-3361-8	Eingang: 230 V~/60 Hz, 2.7A; Ausgang: 230 V~/60 Hz, 400 VA, 300W.	6 Schubladen*/24 Fächer



### \*Auto-Lock-Schublade









\*Gesamtgewicht von LCD- und CPU-Fach: <12,2 kg

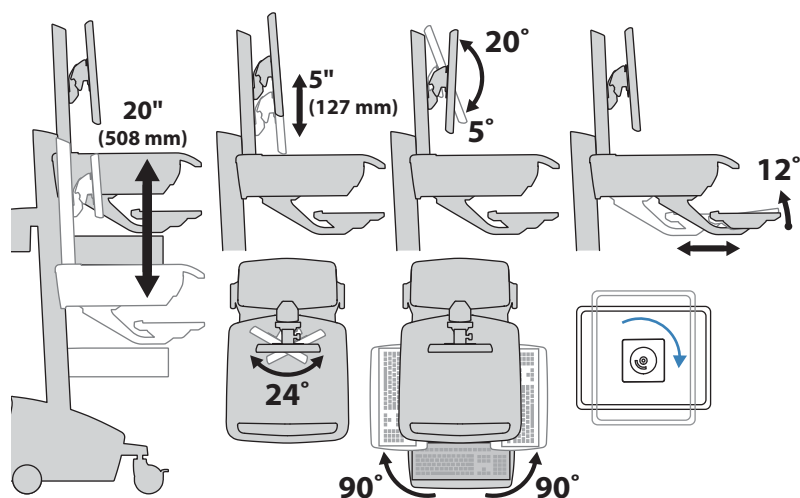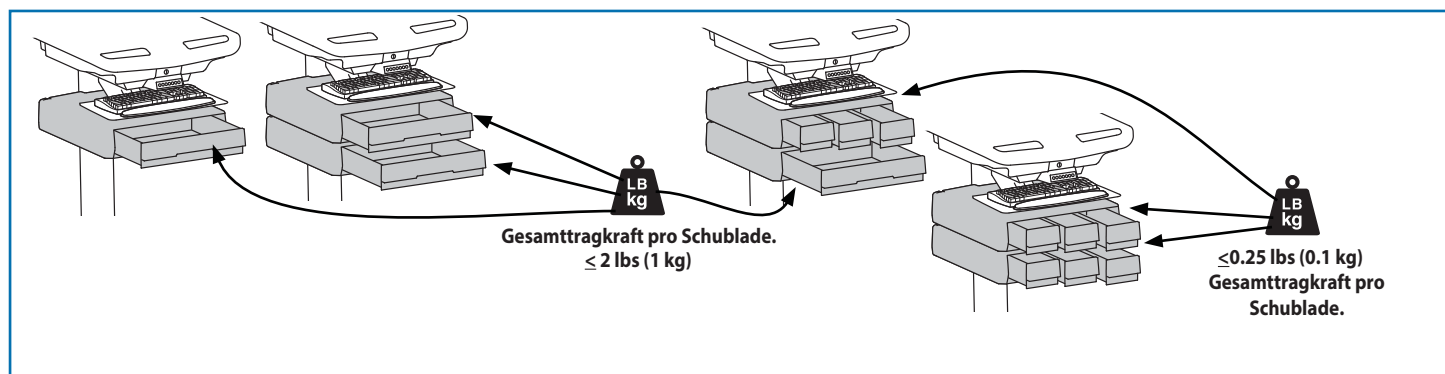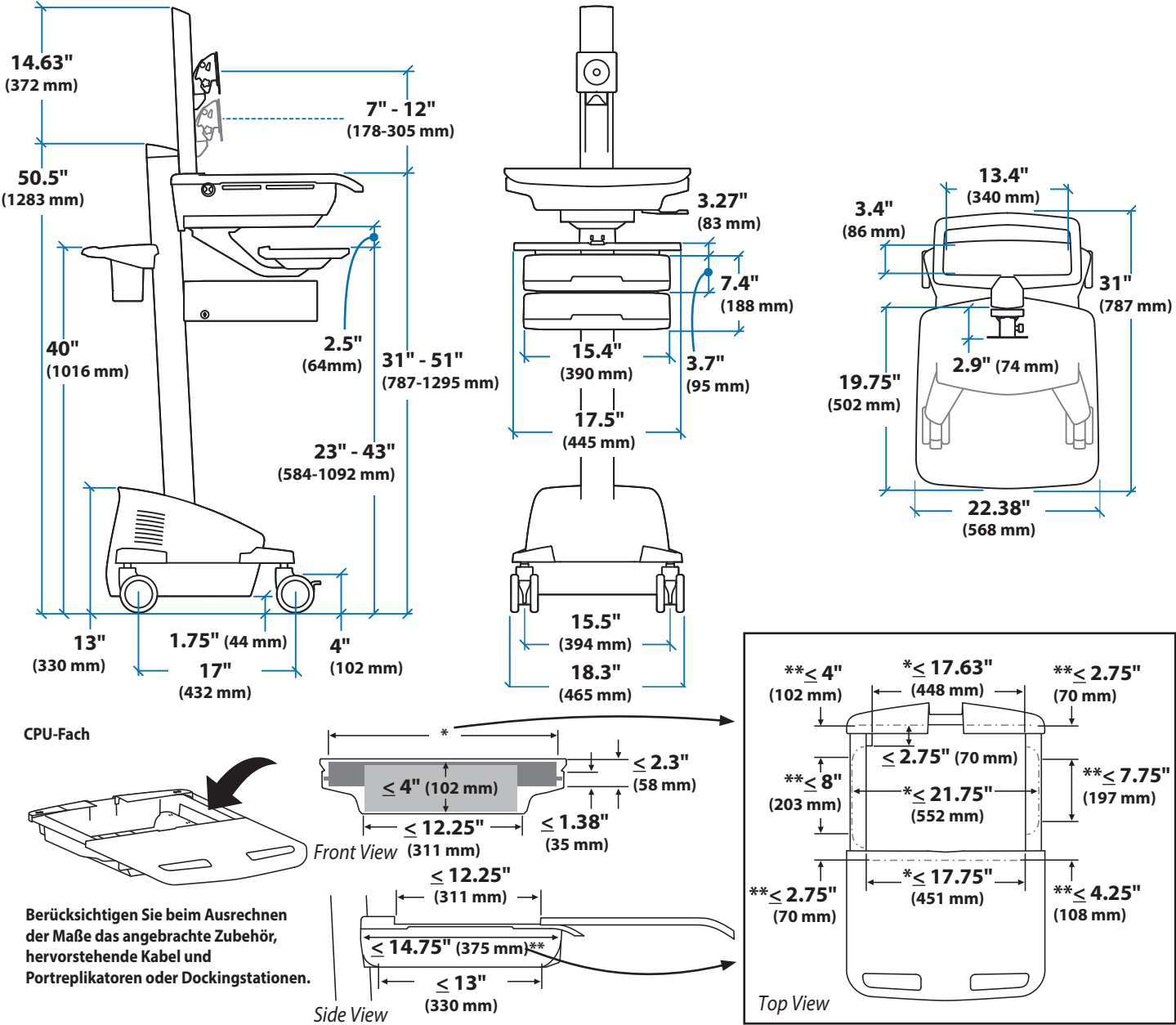**⚠ VORSICHT:** Überschreitet das Gesamtgewicht von LCD und CPU 12,2 kg, muss die CPU auf der Rückseite des Wagens unter Verwendung eines universellen CPU-Halters (als separates Zubehörteil erhältlich) angebracht werden.






1

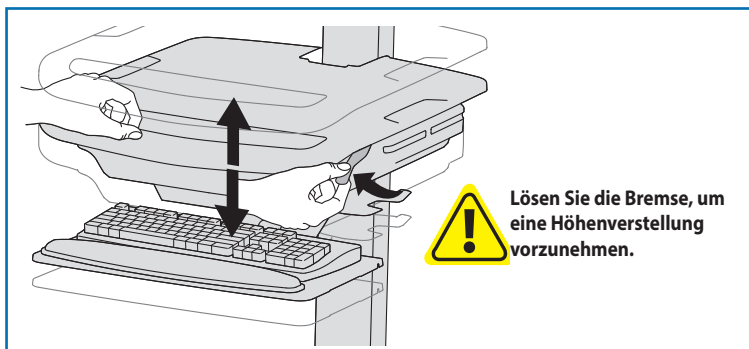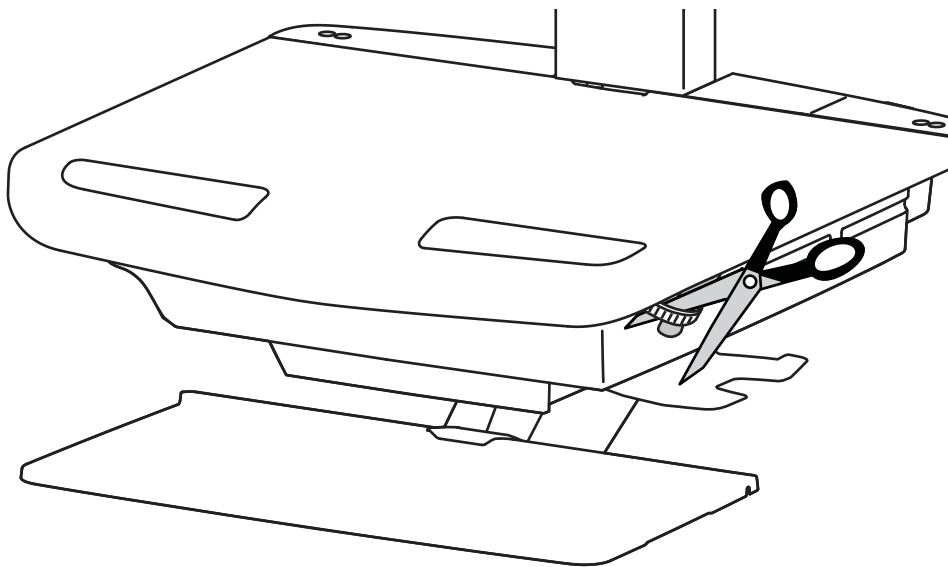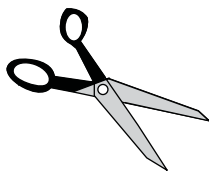





# 2 a

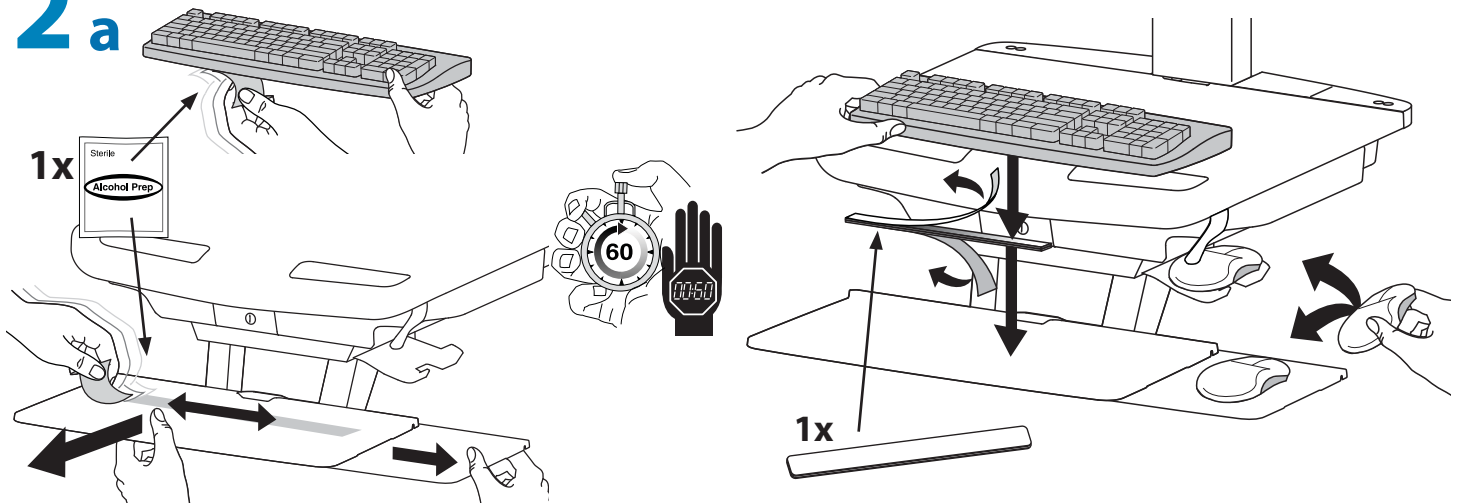


## b

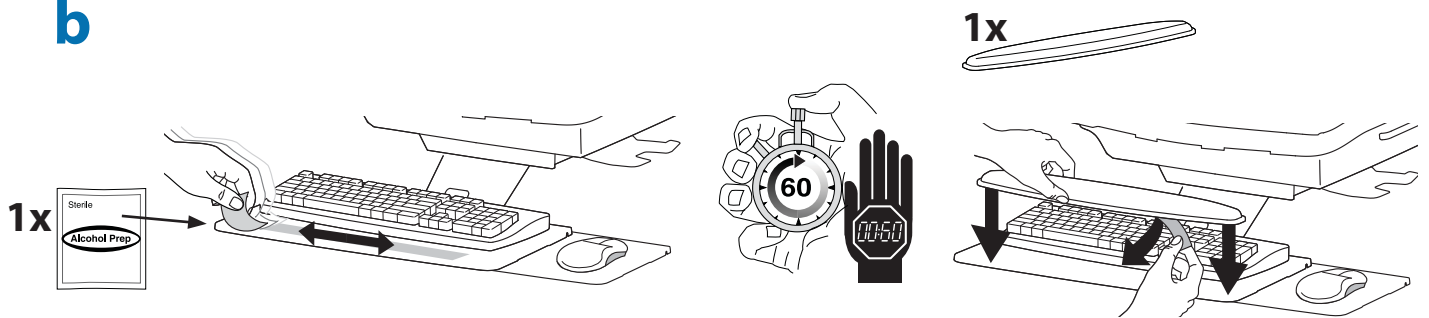


## c

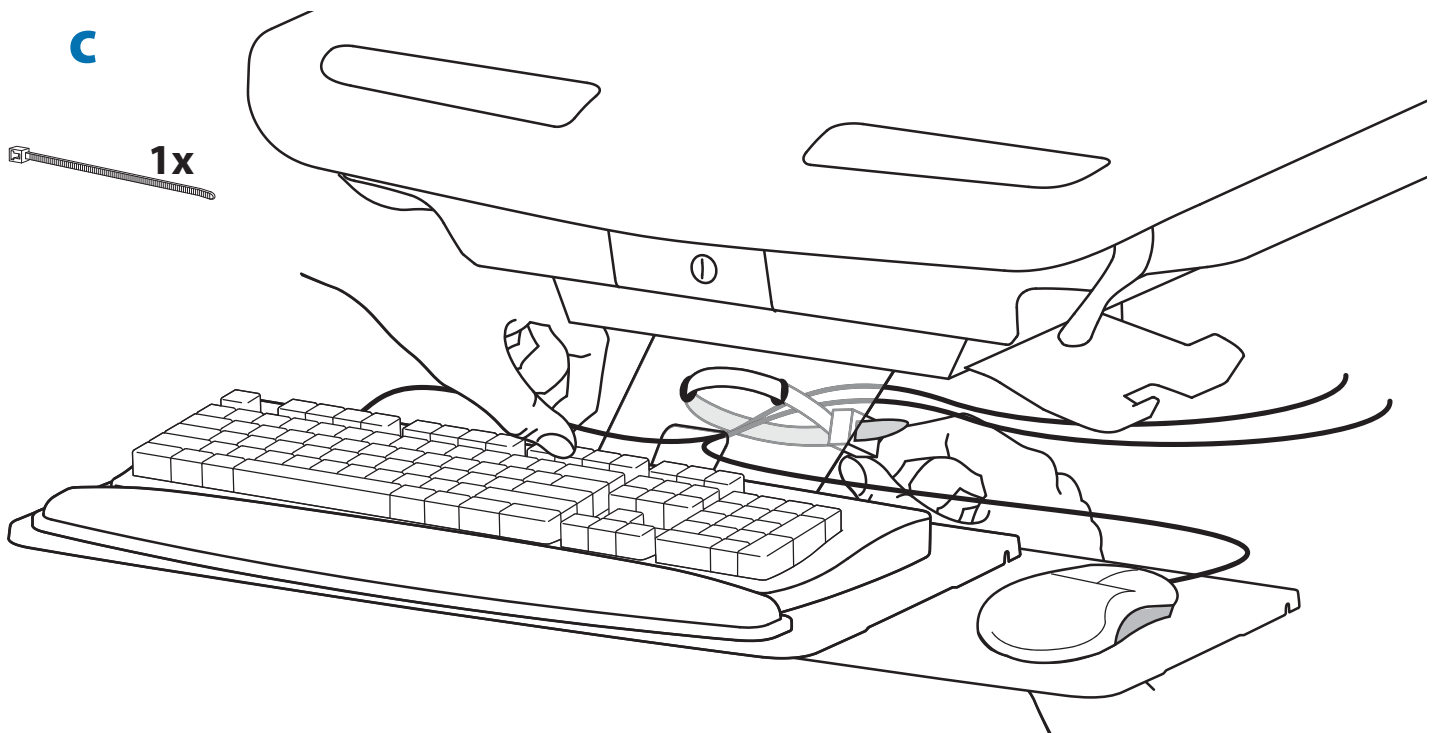



3 a

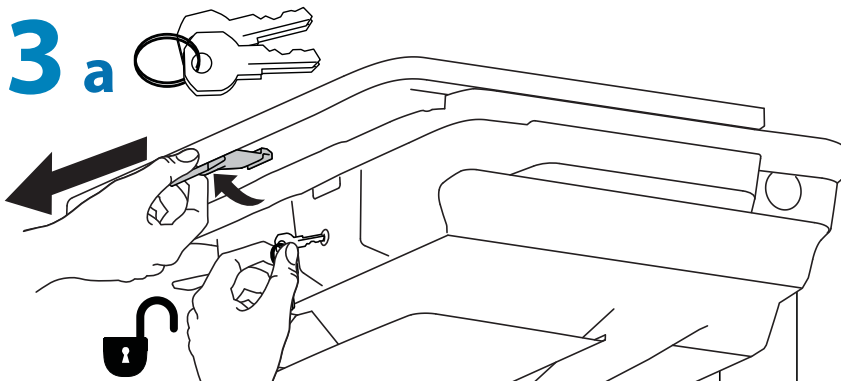

b

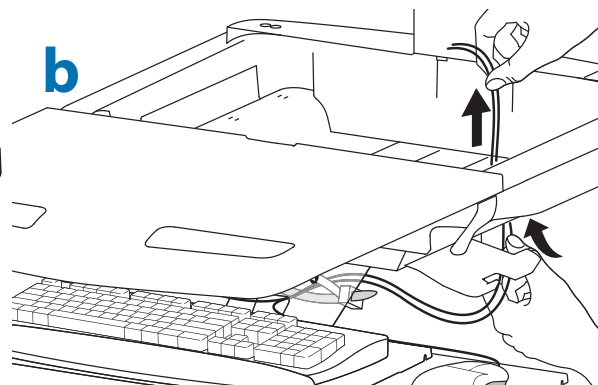


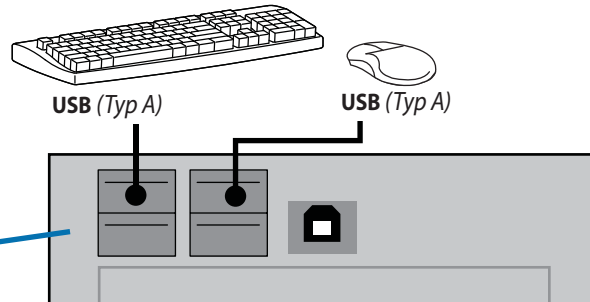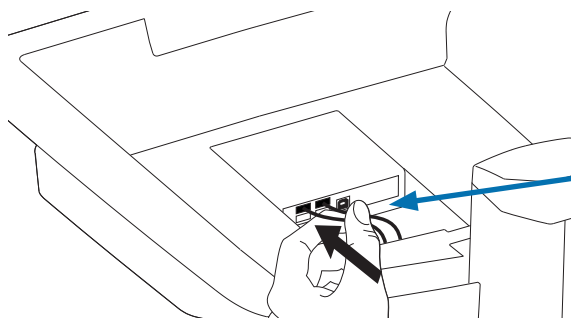**c** Schließen Sie Tastatur und Maus am USB-Hub an




HINWEIS: Barcode-Lesegeräte sollten direkt am USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden. Schließen Sie Barcode-Lesegeräte NICHT am USB-Hub an.

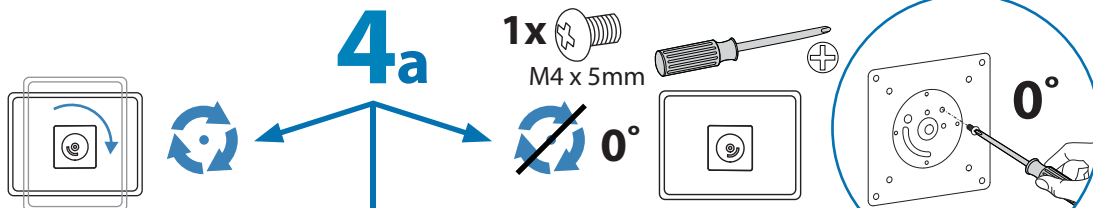4a



**b** 75x75mm / 100x100mm

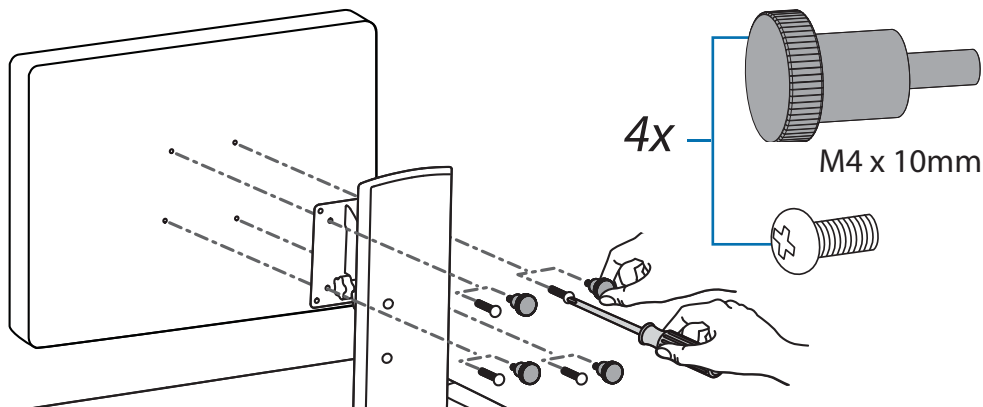


Um mehr Platz zu schaffen und den Luftstrom zu verbessern, kann das Netzteil unter dem Lagerbereich verstaut werden.


1x

2x

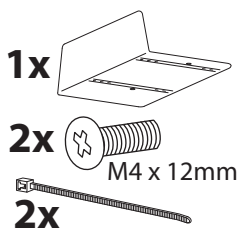
2x




a

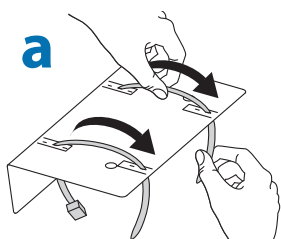

b

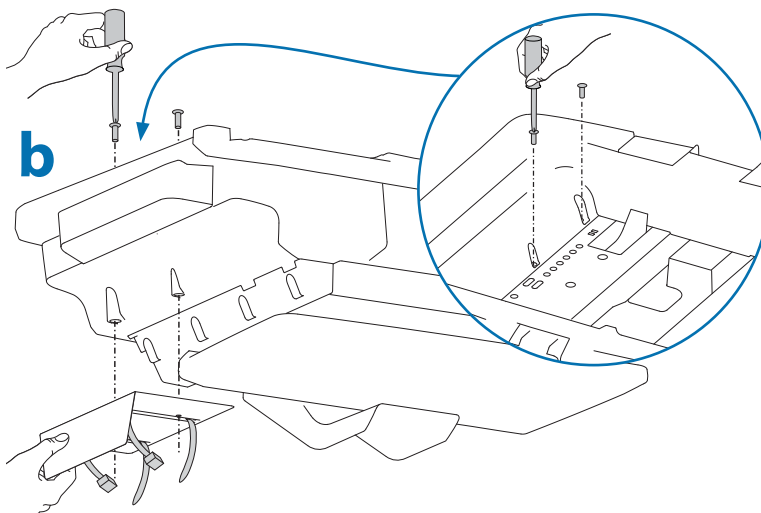


c

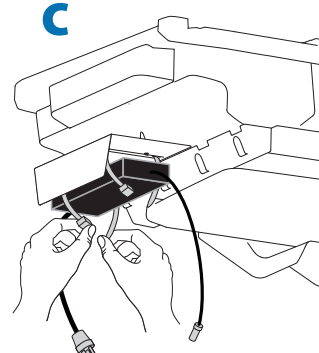




5

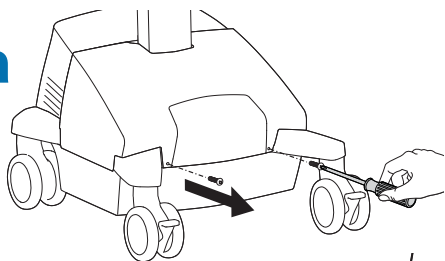
a



b

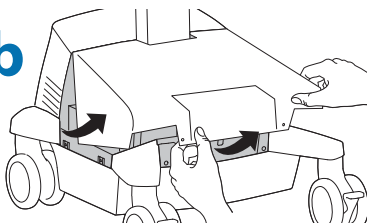


c

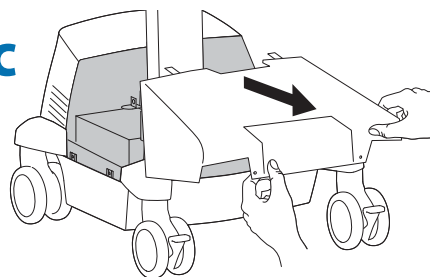

d

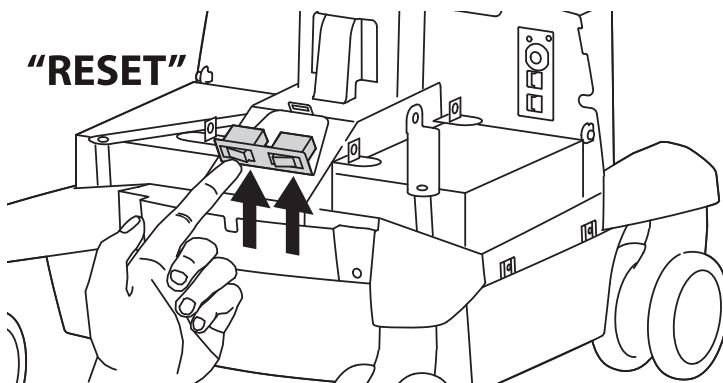
"RESET"




6

Netzkabel anschließen.

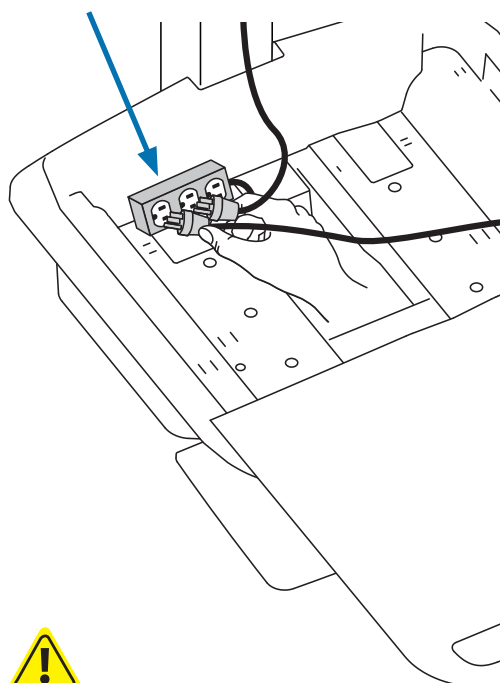Falls sich hier keine Steckdosen befinden, folgen Sie den Schritten a bis d, um die Netzkabel zu verlegen.




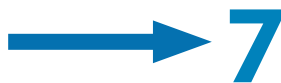
**ACHTUNG!** Beim Anschließen eines elektrischen Geräts an die Steckdose entsteht effektiv ein medizinisches System, wodurch der Sicherheitsgrad eingeschränkt werden kann.







7

a

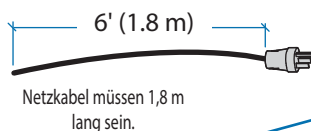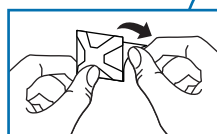Führen Sie die Netzkabel im Turm nach unten.



Netzkabel müssen 1,8 m lang sein.

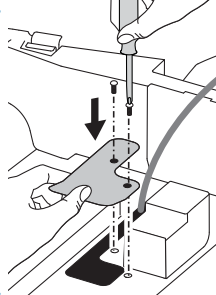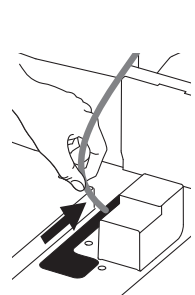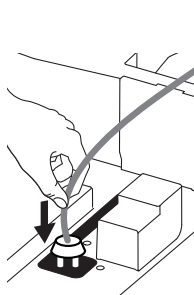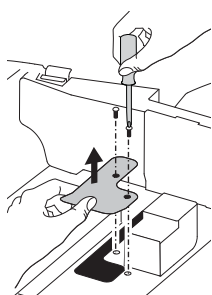



**WARNING**

**DO NOT OPERATE WITHOUT GUARD IN PLACE** 822-447-00

**WARNUNG NEHMEN SIE DAS SYSTEM NUR BEI GESCHLOSSENEM SCHUTZGITTER IN BETRIEB.** Entfernen Sie das Schutzgitter nur, wenn Sie ein Kabel mit einem großen Anschluss an der Unterseite des Fachs entlang führen müssen. Bringen Sie das Schutzgitter anschließend sofort wieder in seine ursprüngliche Position. Eine Nichtbeachtung dieser kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.




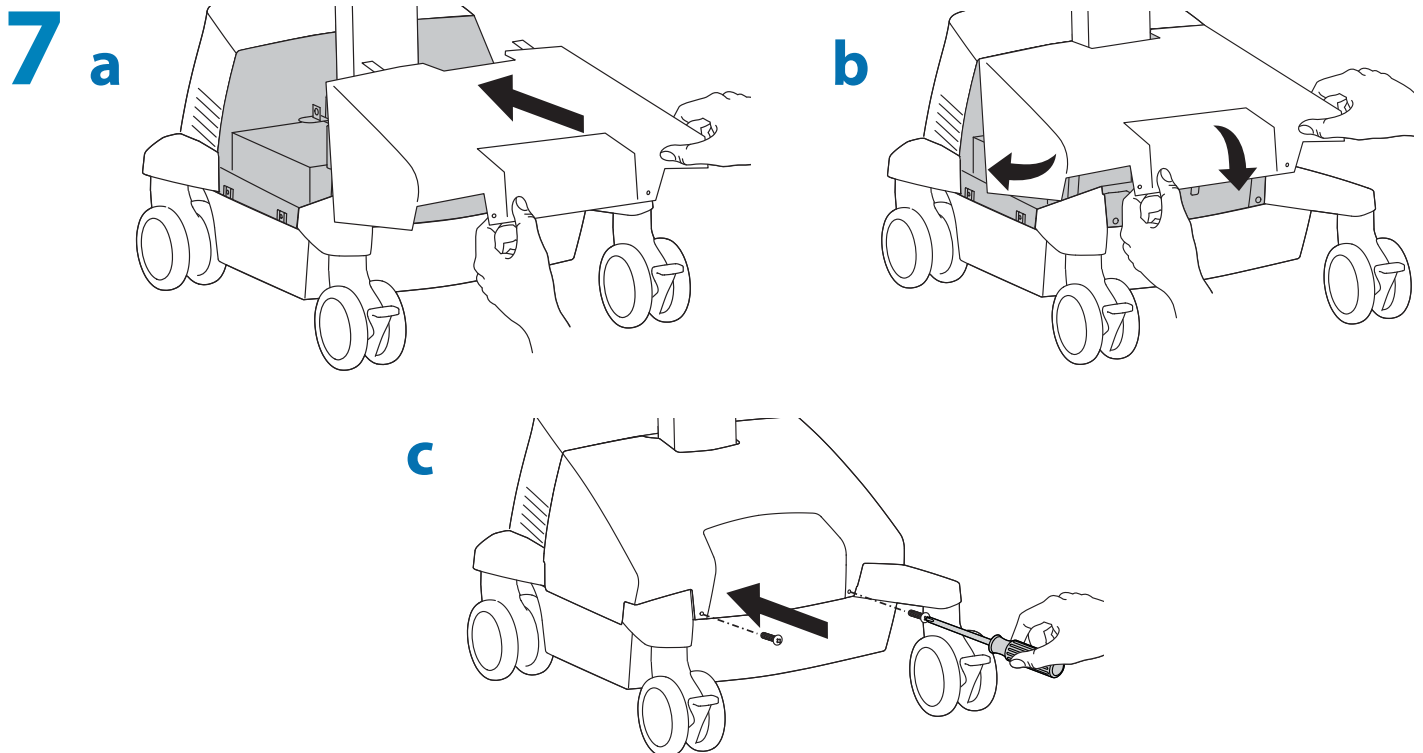
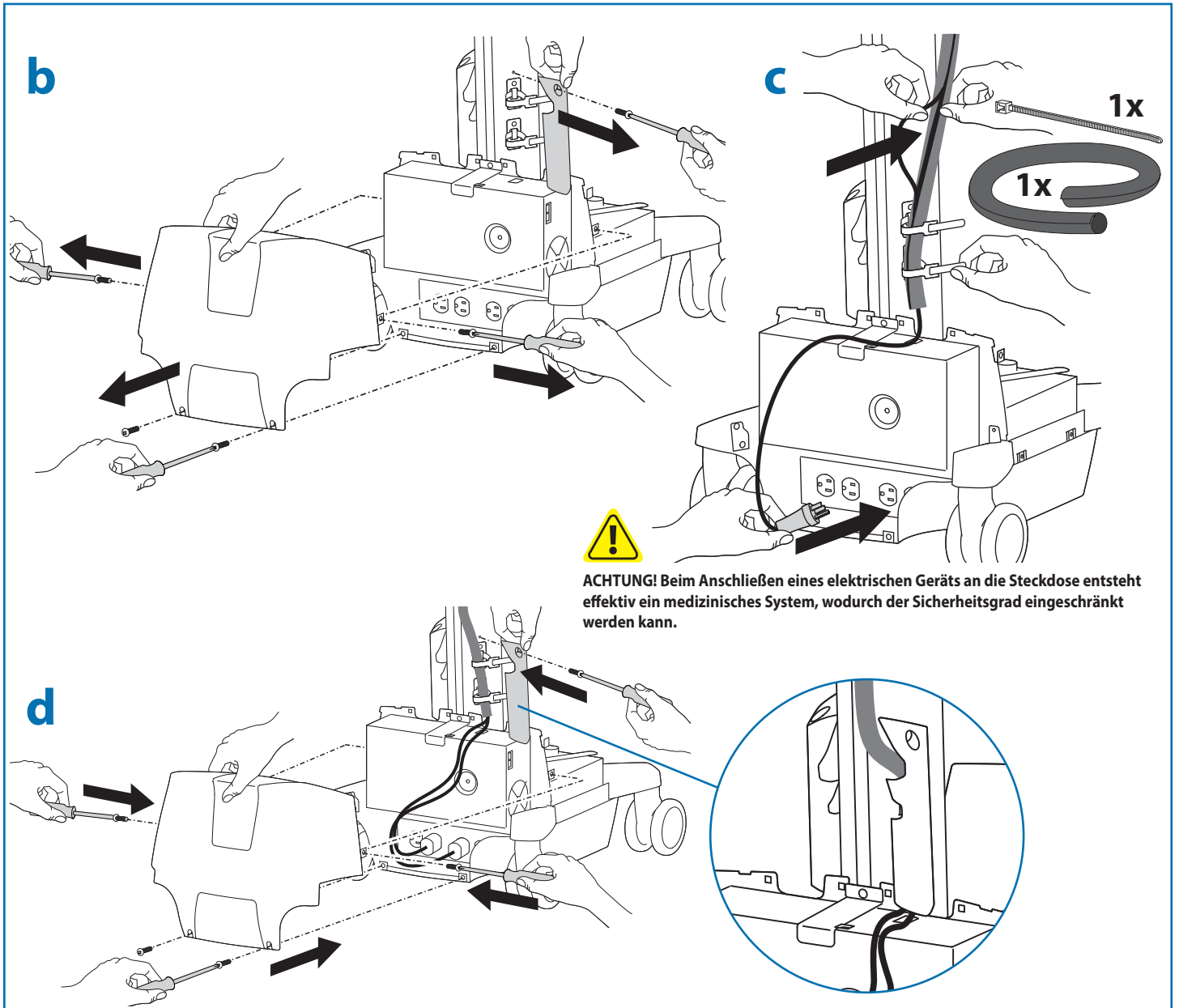
b - d






# 8

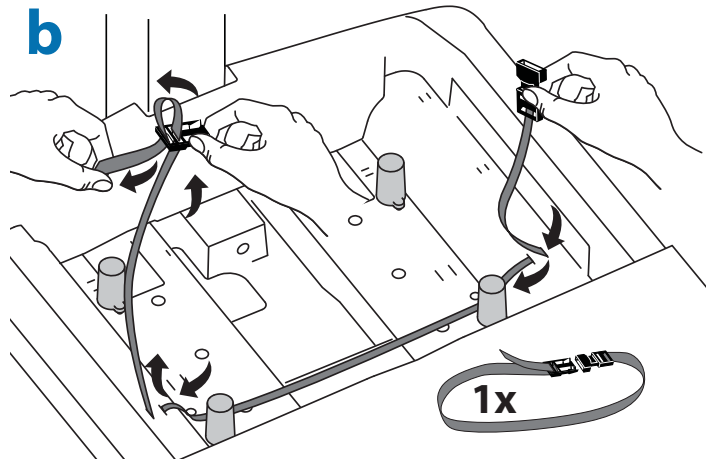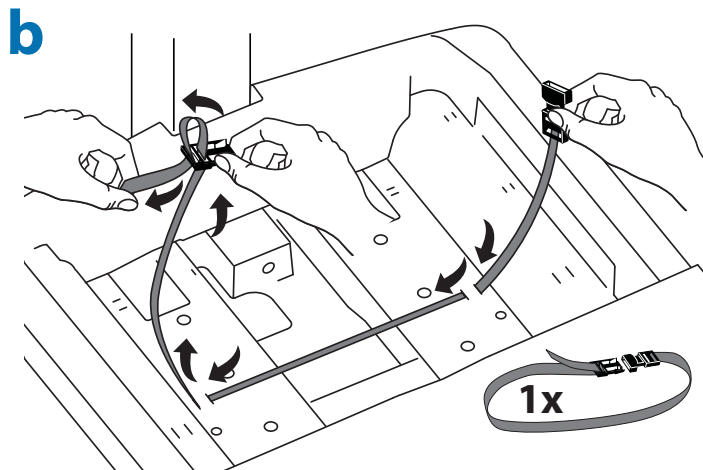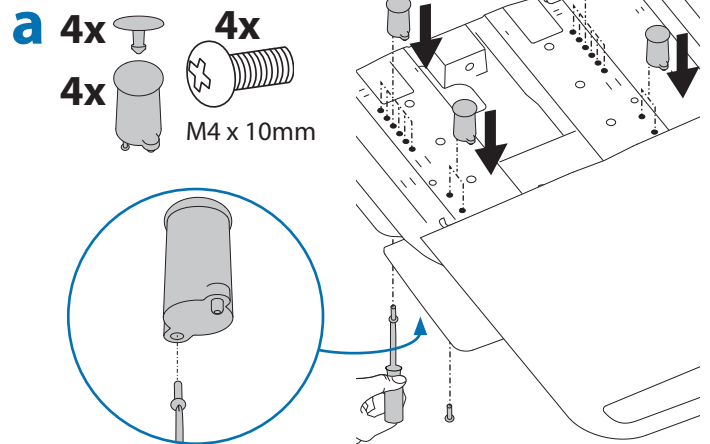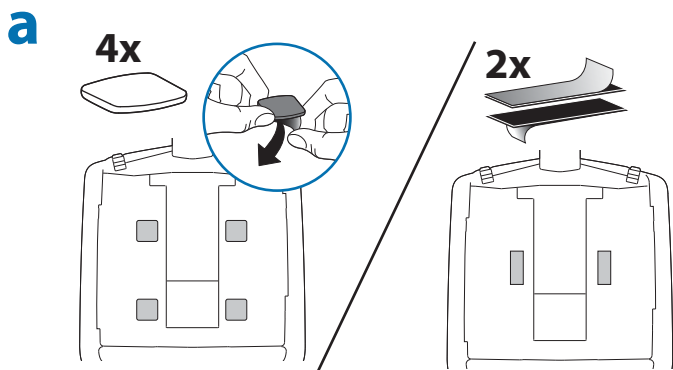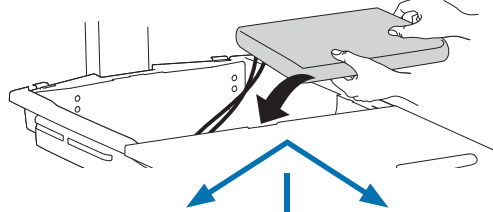Platzieren Sie die Netzadapter im dafür vorgesehenen Fach. Platzieren Sie Netzteile nicht in der Nähe des Computers oder der Belüftungsöffnungen des Fachs.




**c** Schließen Sie die folgenden Kabel (werksseitig verbunden) am Computer an.  
 USB: Dieses Kabel verläuft vom USB-Hub zum Computer und wird zur Stromversorgung des USB-Hubs, der Tastaturbeleuchtung und des Ventilators verwendet. (HINWEIS: Für die Verwendung des USB-Hubs, der Tastaturbeleuchtung und des Ventilators muss der Computer eingeschaltet sein.)  
 Optionaler StyleLink: Dieses USB-Kabel verläuft vom Stromversorgungssystem zum Computer mit StyleLink-Software. Weitere Informationen über StyleLink: <http://4support.ergotron.com>.

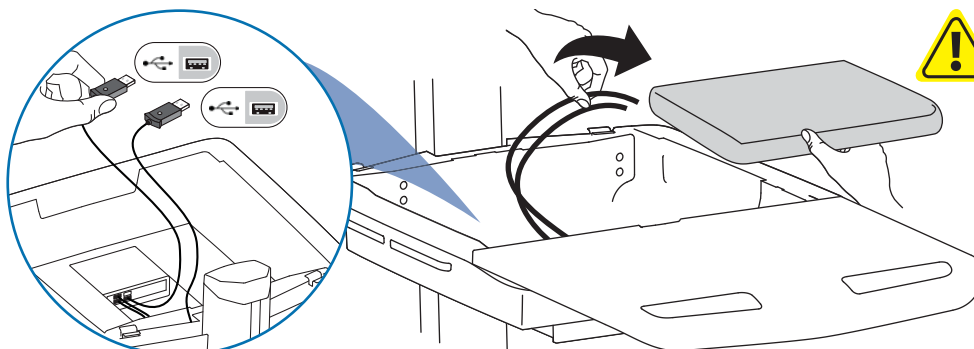

**WARNUNG:** Der Lüfter muss immer in Betrieb sein, wenn der Computer eingeschaltet ist. Der Einsatz eines Computers ohne Lüfter kann zu Überhitzung führen, wodurch die Leistung der Geräte beeinträchtigt wird.

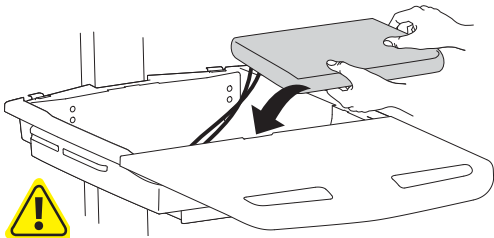d





BLOCKIEREN SIE AUF KEINEN FALL DIE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN!  
EINE BLOCKIERUNG DER BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN KANN ZUR  
ÜBERHITZUNG UND SOMIT ZU GERÄTESCHÄDEN FÜHREN.



Unterbringung der CPUs im gesicherten Fachbereich:

USFF (Ultra Small Form Factor,  
sehr kleiner Formfaktor)

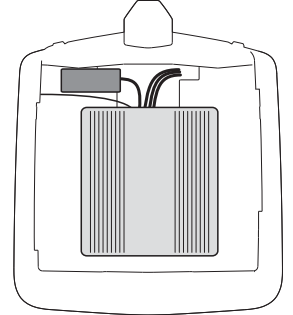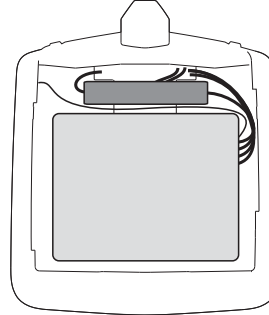
Thin Client



Zentrieren Sie die CPU im Fachbereich.

Um mehr Platz zu schaffen und den  
Luftstrom zu verbessern, kann das Netzteil  
unter dem Lagerbereich verstaut werden.




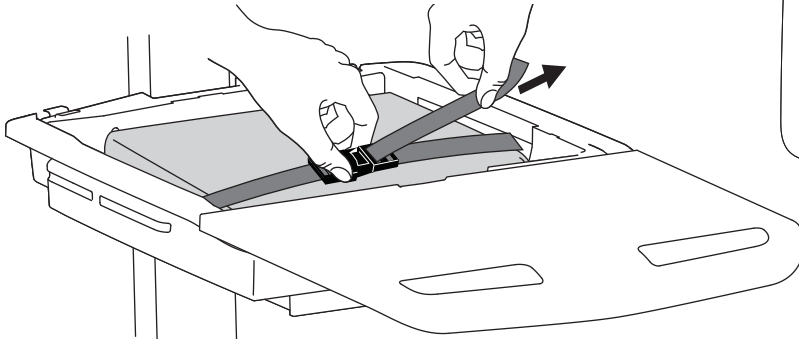
e



Falls der Computer mit seinen Kabeln zu breit  
ist, befolgen Sie bitte diese Anleitung.

1

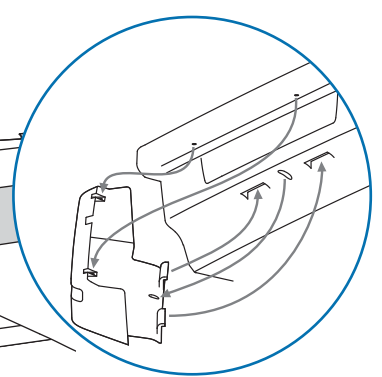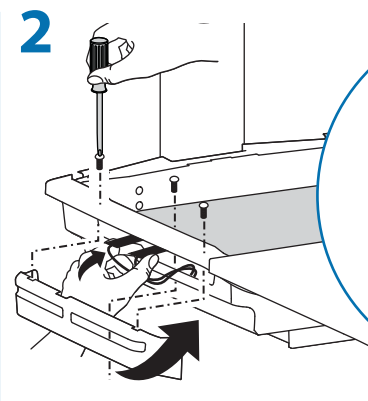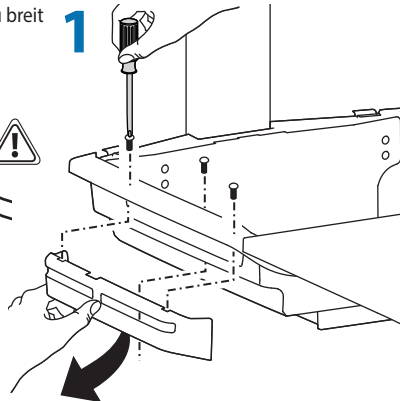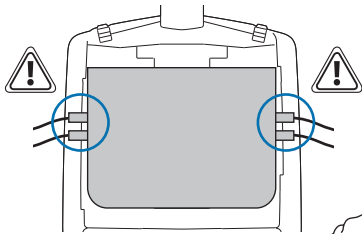
2





f



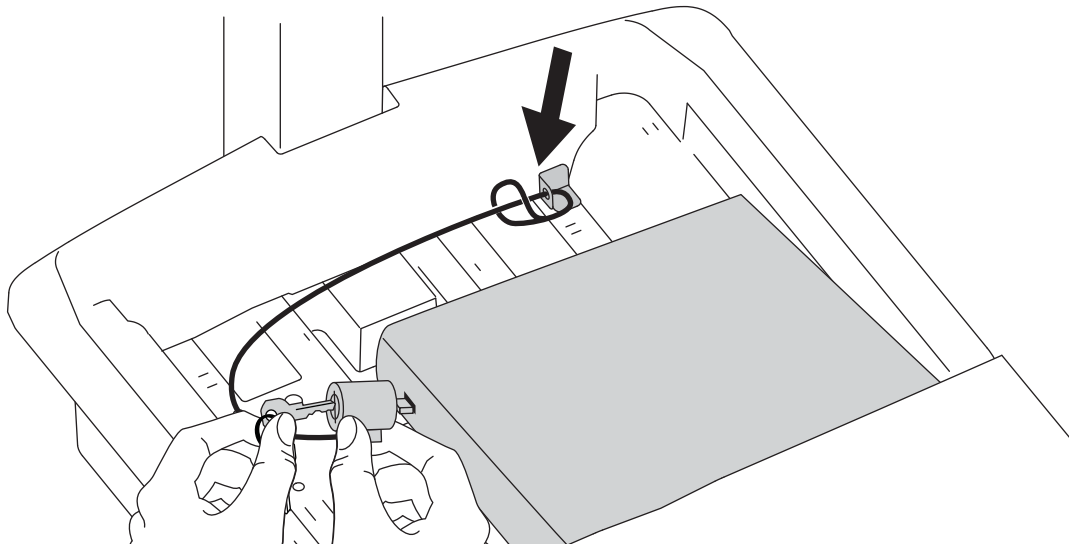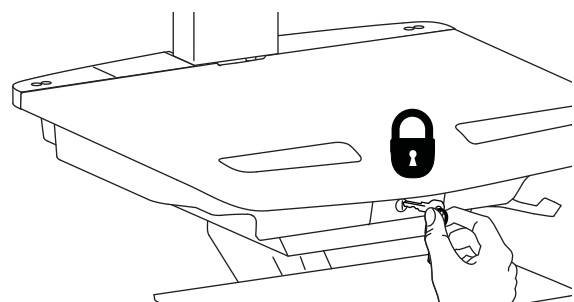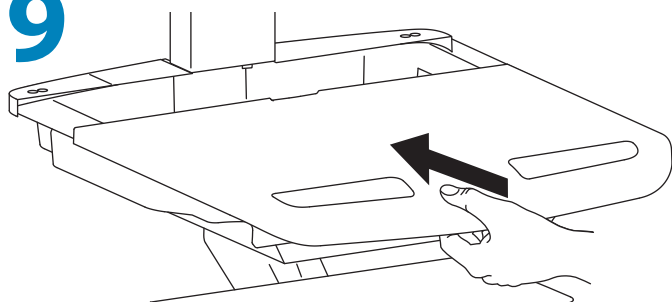
1x





9

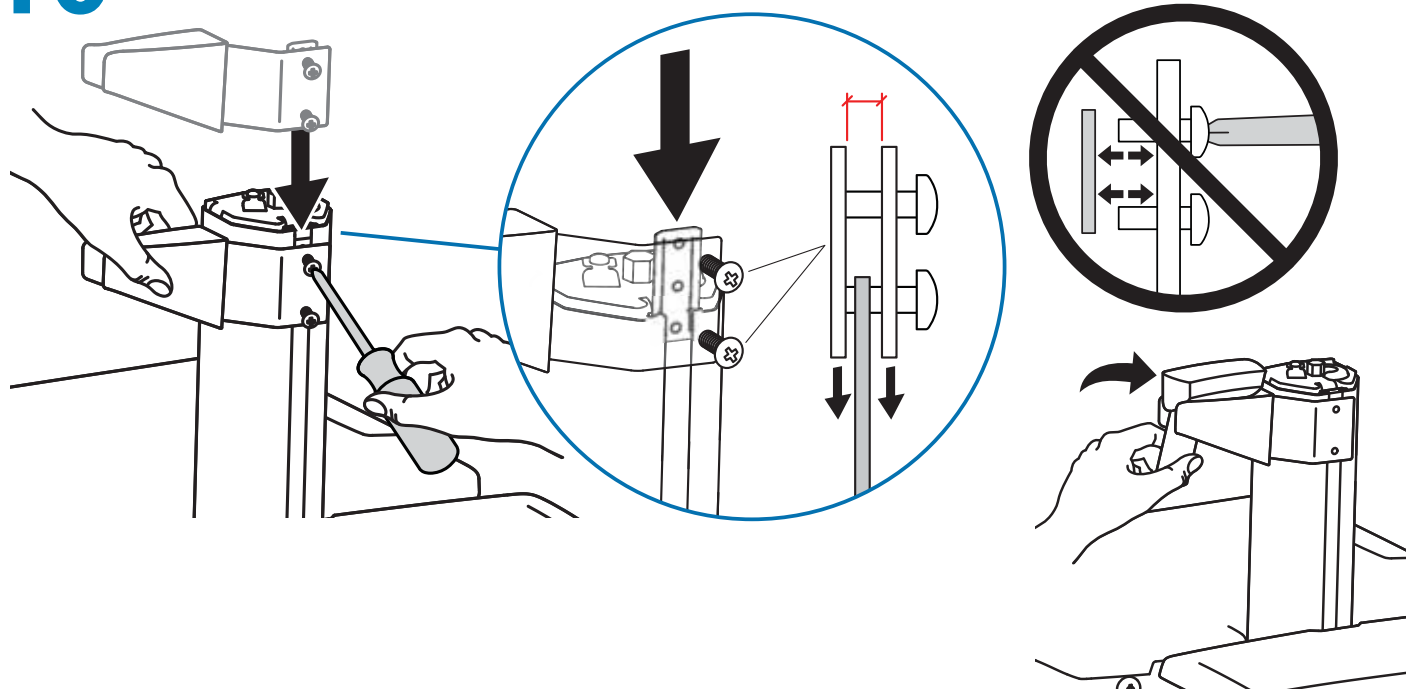


10



11

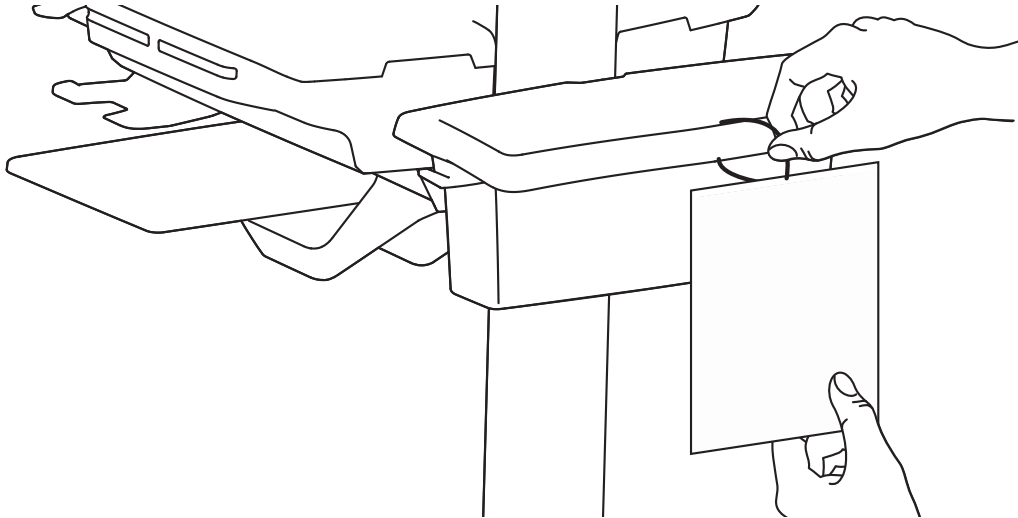
- 1x 
- 1x 




## 12

Es ist von Bedeutung, dass Sie dieses Produkt entsprechend dem Gewicht des installierten Geräts wie in den folgenden Schritten beschrieben anpassen. Wenn Zubehör von diesem Produkt entfernt oder dazu hinzugefügt wird, was zu einer Änderung der Last führt, sollten Sie diese Einstellungsschritte wiederholen, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten. Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.

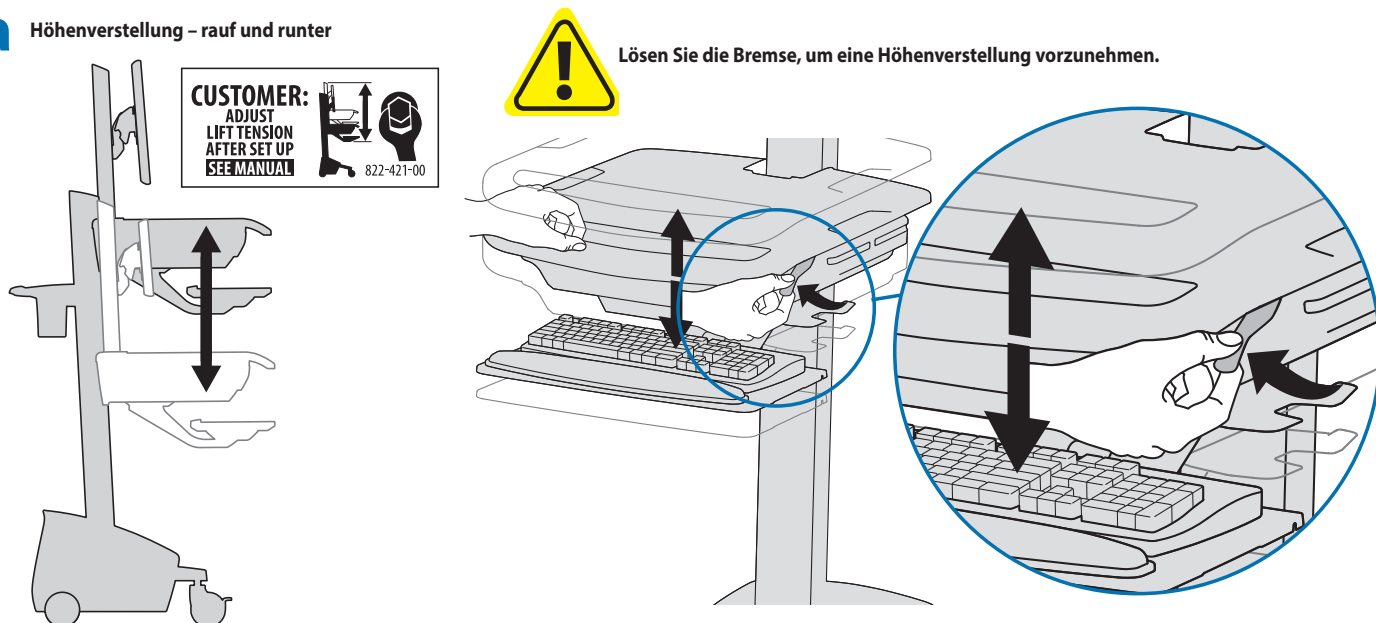
### a Höhenverstellung – rauf und runter




**Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.**

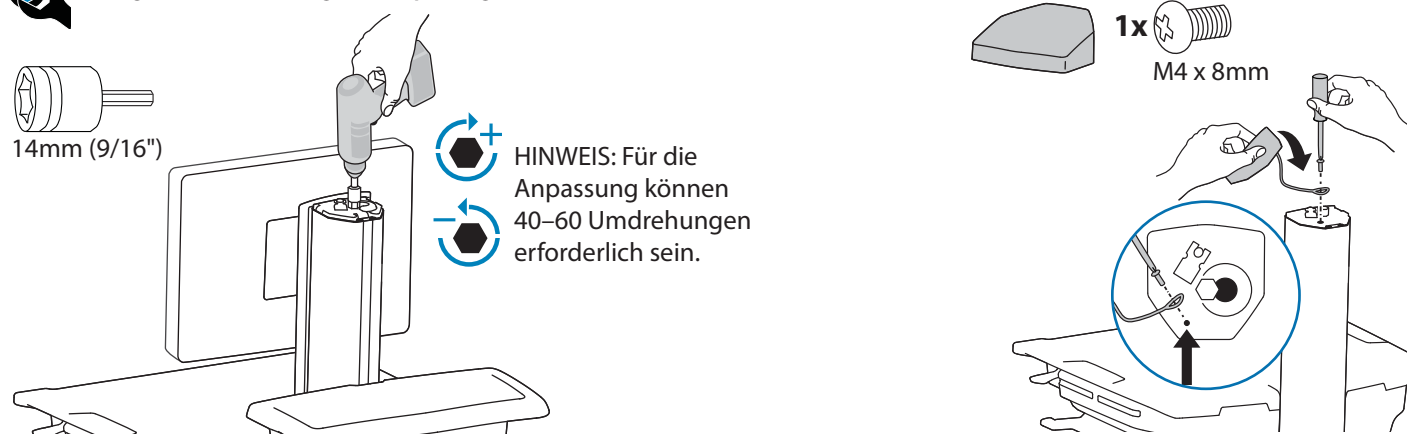

### b Neigung – vor und zurück

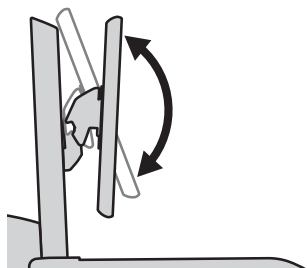


**Lockern Sie den Drehknopf, neigen Sie das Display auf die gewünschte Position, und ziehen Sie den Drehknopf wieder fest.**




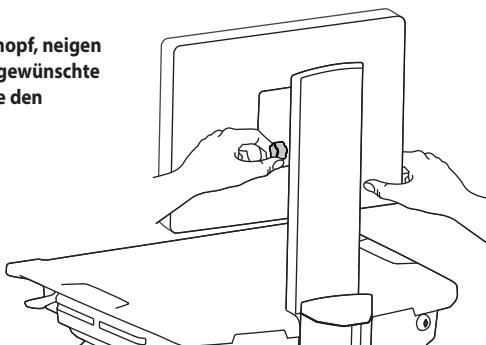




## C Höhenverstellung – rauf und runter


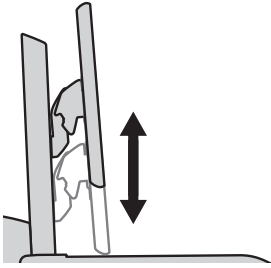


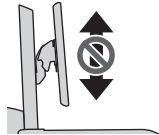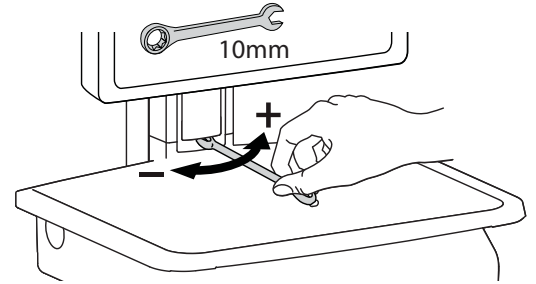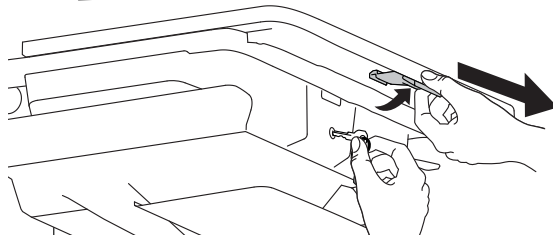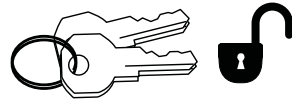Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.






## Arretieren der Höhenverstellung des LCD-Bildschirms

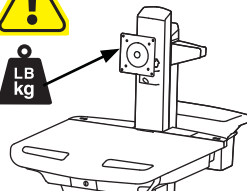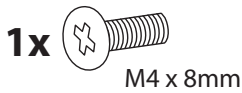Bei schwereren Bildschirmen oder bei Verwendung eines Tablet-PCs können Sie die Höhenverstellung des Bildschirms arretieren, indem Sie diese Schraube in eines der drei dafür vorgesehenen Löcher an der Rückseite der Höhenverstellung entsprechend der gewünschten Position einschrauben.




Mit unabhängiger  
LCD-Höhenverstellung:  
6-14 lbs (2.7-6.4 kg)

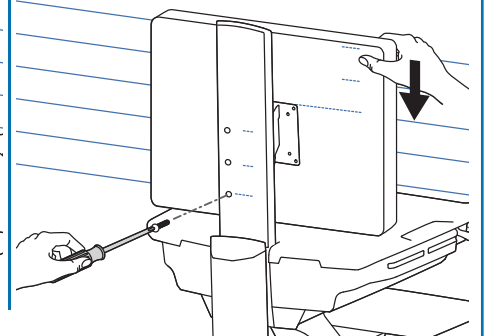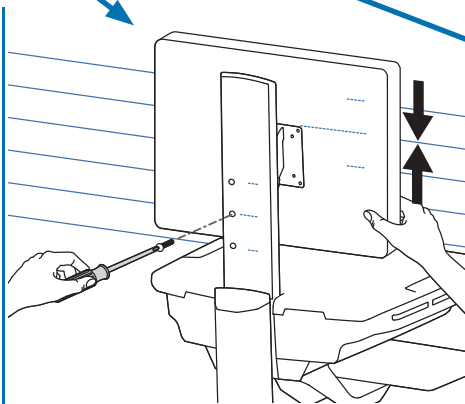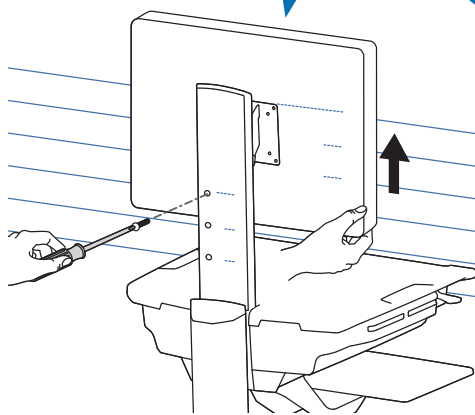Ohne unabhängige LCD-Höhenverstellung:  
20 lbs (9 kg)



## ! WARNUNG

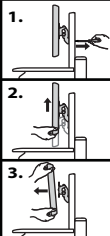

## STOßGEFAHR!

BEWEGLICHE TEILE KÖNNEN ZU QUETSCHUNGEN UND SCHNITTVERLETZUNGEN FÜHREN.

Entfernen Sie die Stopp-Schraube NUR bei befestigtem Monitor.

Dadurch schnellst das das Monitorgelenk nach oben. Dies kann zu Verletzungen führen.

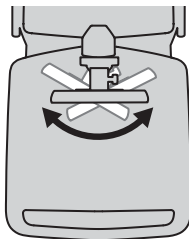
### So entfernen Sie den Monitor:

1. Entfernen Sie die Stopp-Schraube, solange der Monitor befestigt ist.
2. Bringen Sie den Monitor in die höchste Position.
3. Entfernen Sie den Monitor.


Il existe un risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cet avertissement.

Pour plus d'informations et d'instructions, consultez le guide du produit sur <http://4support.ergotron.com>, ou contactez le service client d'Ergotron au (+1) 800 888-8458. 822-055

## d Drehen – links und rechts



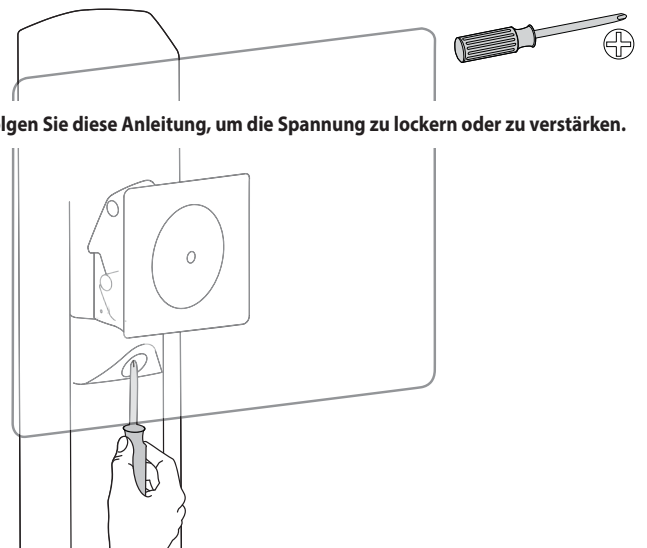
Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.




## 13

### Erste Inbetriebnahme/Batterieaufladung (Ladedauer ca. acht Stunden)

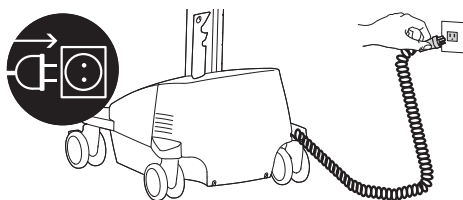- a** Stecken Sie das Netzkabel des Computerwagens in eine Netzsteckdose.




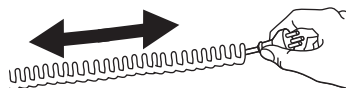Ziehen Sie das Spiralkabel nicht mehr als 2,5 Meter in die Länge, da es sonst zu Schäden am Kabel kommen kann.




**! VORSICHT: Dieses Gerät weist keine Ein-/Aus-Taste auf und lässt sich nur durch Ziehen des Netzkabels vom Netz trennen. Die Steckdose sollte problemlos erreichbar sein und sich in der Nähe des Geräts befinden.**

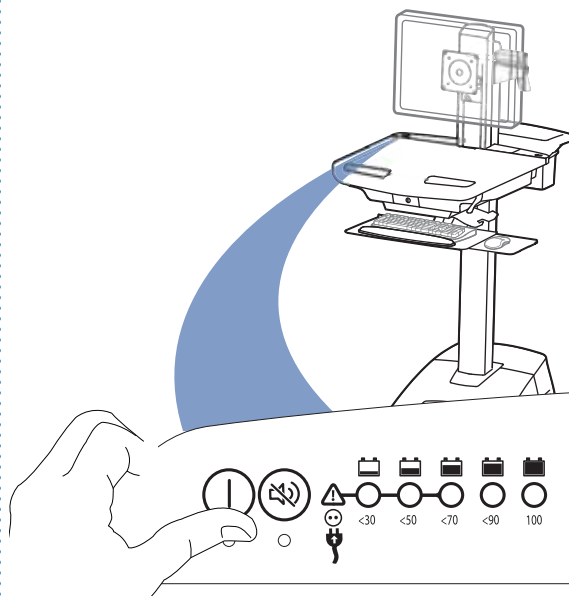- b** Schalten Sie das Power System ein, indem Sie die Netztaaste 1-3 Sekunden lang gedrückt halten.



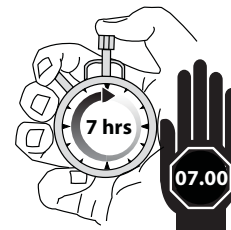- c** Ist das Netzkabel des Computerwagens an eine Netzsteckdose angeschlossen, warten Sie, bis der Wagen zu 100% aufgeladen ist. (Ladedauer ca. acht Stunden)



Hinweis: Wenn StyleLink installiert ist, wird der Batteriestatus "Prüfen" angezeigt, bis die Batterie den Ladevorgang durchlaufen hat (Auf 100 % aufladen, auf < 70 % entladen und anschließend den Wagen mit der Netzsteckdose verbinden). Nachdem die Batterie einen Ladevorgang durchlaufen hat, zeigt StyleLink den Batteriestatus an. Wenn StyleLink weiterhin den Status "Prüfen" anzeigt, wiederholen Sie die Aufladung/Entladung und schließen Sie den Wagen erneut an.

Das Bedienfeld des Stromversorgungssystems zeigt durch eine Reihe durchgehend leuchtender oder blinkender roter, gelber und grüner LEDs oder einen Alarmton, der ertönt, sobald der Ladestatus weniger als 30% beträgt, den Ladestatus der Batterie an. Beachten Sie, dass die Batterie jeden Tag auf 100% Leistung aufgeladen werden muss und dass Sie den Computerwagen auch während des Ladevorgangs benutzen können. Schließen Sie ihn deshalb so häufig wie möglich an die Netzversorgung an, damit der Wagen immer mit ausreichend Leistung versorgt sind!

HINWEIS: Für eine optimale Batterielaufzeit sollten Sie den Bildschirm so oft wie möglich in den Energiesparmodus schalten.

Batterieladung 100%

Die LED blinkt während des Ladevorgangs (wenn das Netzkabel an der Netzsteckdose angeschlossen ist). Laden Sie die Batterie so lange auf, bis die LED aufhört zu blinken. Sobald die LED nicht mehr blinkt, können Sie den Netzstecker aus der Steckdose entfernen. Sie können den Computerwagen auch während des Ladevorgangs benutzen.

Batterieladung geringer als 90%

Batterieladung geringer als 70%

Batterieladung geringer als 50%

Batterieladung geringer als 30% Die LED leuchtet rot auf und der Alarm ertönt. Stecken Sie den Netzstecker ein, und laden Sie auf 100% auf! Sie können den Computerwagen auch während des Ladevorgangs benutzen.

Alarmstumm Taste. Durch das Drücken dieser Taste wird der Alarm vorübergehend unterdrückt.

Hauptschalter für interne Stromversorgungssteckdosen. Bei Betätigung werden die an die internen Steckdosen angeschlossenen Komponenten mit Strom versorgt bzw. es wird deren Stromversorgung unterbrochen.

**HINWEIS: Wird der Computerwagen häufig bei einem Ladestatus unter 30% verwendet, verkürzt dies die Lebensdauer der Batterie erheblich. Dadurch kann die Batteriegarantie verfallen.**



100



< 90



< 70



< 50



< 30



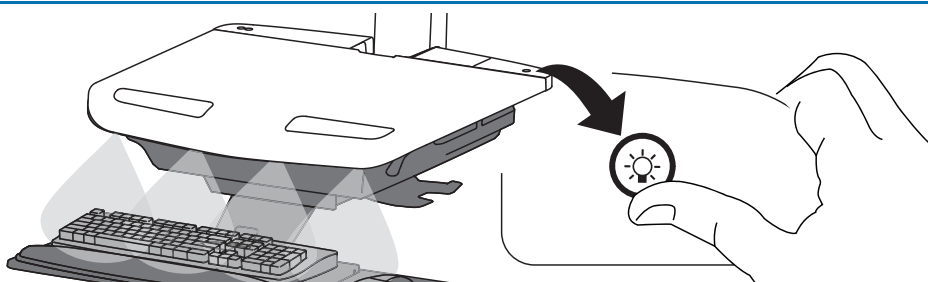
Wenn die LED leuchtet, ist der Alarm ausgeschaltet und ertönt erst, wenn die Batterieladung kleiner als 30% ist. Weitere Informationen zum Ein- und Ausschalten des Alarms erhalten Sie beim Ergotron-Kundendienst.

Leuchtet die LED, ist das Stromversorgungssystem eingeschaltet. Leuchtet keine LED, so ist das Stromversorgungssystem ausgeschaltet.


## 14

### Tastaturbeleuchtung

1. Schalten Sie den Computer ein.
  2. Test Keyboard Light.
- Die Tastaturbeleuchtung schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab, sofern sie nicht manuell ausgeschaltet wird.



# 15

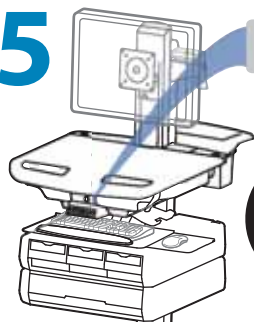


**HINWEIS:** Nach Erhalt des Computerwagens sollte der Benutzer die General-PIN ändern.

**General-PIN vergessen**

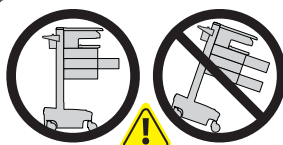Wenden Sie sich für Anweisungen an den Ergotron-Kundendienst.

1x



**VORSICHT:** Vor dem Öffnen von Schubladen die Arbeitsfläche schließen. Nur immer jeweils eine Schublade öffnen. Den Wagen nicht schieben, wenn Schubladen oder die Arbeitsfläche offen sind. Ein Missachten dieser Anleitung kann zu einer Instabilität des Wagens führen.

**Vergewissern Sie sich, dass die Batterien für die Stromversorgung eingelegt sind und funktionieren. Die Stromversorgung muss nicht am Stromversorgungsbedienfeld eingeschaltet werden.**

## General-PIN für die erstmalige Einrichtung (standardmäßige General-PIN: 12345)

Wird die General-PIN vergessen, wenden Sie sich für Anweisungen an den Ergotron-Kundendienst.

1. Geben Sie die General-PIN ein (alle Nummern, die einer verfügbaren Schublade zugewiesen sind, leuchten auf).
2. Drücken Sie 3 und 5 gleichzeitig (Nummer 3 und 5 leuchten grün).
3. Drücken Sie 3 und 5 erneut gleichzeitig (Nummer 3 und 5 blinken grün).
4. Drücken Sie 3 und 5 ein drittes Mal gleichzeitig (alle Nummern leuchten grün). Die neue General-PIN muss innerhalb von 5 Sekunden eingegeben werden.
5. Geben Sie die neue fünfstellige General-PIN ein (alle Nummern blinken grün).
6. Warten Sie 5 Sekunden, bis das System den Programmiermodus verlässt (alle Nummern blinken einige Male grün).

## Programmieren von Benutzer-PINs

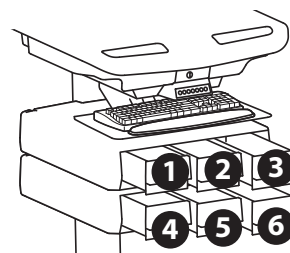
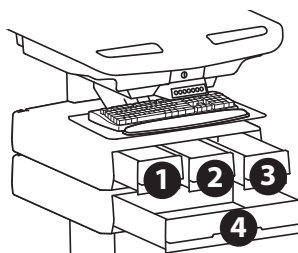
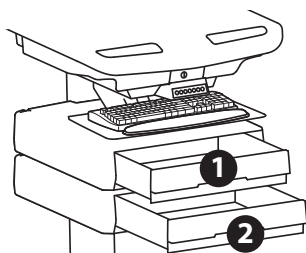
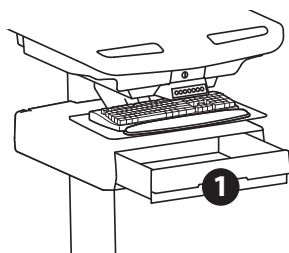
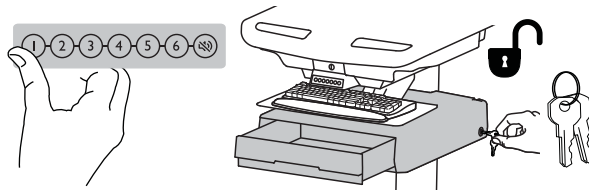
1. Geben Sie die General-PIN ein (alle Nummern, die einer verfügbaren Schublade zugewiesen sind, leuchten auf).
  2. Drücken Sie 4 und 6 gleichzeitig (Nummer 4 und 6 leuchten grün).
  3. Drücken Sie 4 und 6 erneut gleichzeitig (Nummer 4 und 6 blinken grün).
  4. Drücken Sie 4 und 6 ein drittes Mal gleichzeitig (alle Nummern leuchten grün). Die neue Benutzer-PIN muss innerhalb von 10 Sekunden eingegeben werden.
  5. Geben Sie die neue fünfstellige Benutzer-PIN ein (alle Nummern blinken grün). Sie können nach Bedarf weitere fünfstellige Benutzer-PINs eingeben.
- Warten Sie 10 Sekunden, bis das System den Programmiermodus verlässt (alle Nummern blinken einige Male grün).

**HINWEIS:** Es können bis zu 100 Benutzer-PINs eingegeben werden. Bei Eingabe von über 100 Benutzer-PINs wird die älteste PIN durch die zuletzt programmierte PIN überschrieben.

## Entsperren der Schublade (3 Methoden):

- Geben Sie die General-PIN ein, und drücken Sie die Nummer der gewünschten Schublade\*.
- Geben Sie die Benutzer-PIN ein, und drücken Sie die Nummer der gewünschten Schublade\*.
- Schlüssel - 1/4-Drehung im Uhrzeigersinn

\*Schubladennummern:



## Sperren der Schublade:

- Warten Sie 4 Sekunden, bis die Sperre automatisch aktiviert wird.

**HINWEIS:** Zur Sperrung muss die Schublade vollständig geschlossen sein.

## Fehlerbehebung bei der Schublade

### Die Nummern auf dem Nummernblock leuchten nicht:

- Berühren Sie den Nummernblock an einer beliebigen Stelle, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren (die Schublade bleibt verschlossen, bis Sie eine gültige PIN eingeben).
- Überprüfen Sie, ob das Gleichstromkabel angeschlossen ist.

### Schublade lässt sich nach Eingabe der Benutzer-PIN nicht öffnen:

- Prüfen Sie das System durch Eingabe der General-PIN. Lässt sich die Schublade nicht entsperren, wenden Sie sich anhand der Anweisungen in „Generalcode vergessen“ an den Ergotron-Kundendienst).

**Lichter: Bedeutung:**

1,2,3,4,5 oder 6 sowie die rote Stummtaste

**blinkt, und es wird ein Alarmsignal ausgegeben:**

Schublade ist über 20 Sekunden lang geöffnet. Der Alarm lässt sich durch Betätigen der Stummtaste abschalten. Das System funktioniert nicht, bis die Schublade geschlossen und gesperrt ist. Die Nummer der entsprechenden offenen Schublade blinkt rot auf der Tastatur.

**Alle verfügbaren Schubladennummern**

**blinken grün:**

Warten auf die Auswahl der Schublade (siehe „Entsperren der Schublade“)

**Alle verfügbaren Schubladennummern**

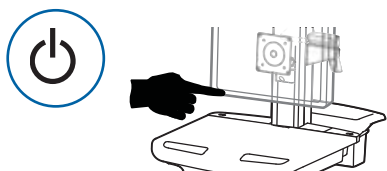
**blinken rot:**

Firmware upgrade is happening


**Alle Lichter blinken ein Mal:** Neuer Code wurde akzeptiert.

**Alle Lichter blinken drei Mal:** Der Programmiermodus wird beendet.

1 Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.



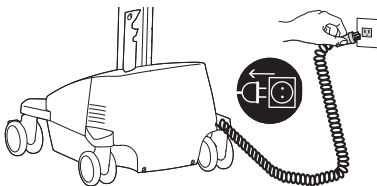
2 Trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle.




3 Schalten Sie die Stromversorgung ab, indem Sie den Hauptschalter 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Betriebs-LED erlischt.



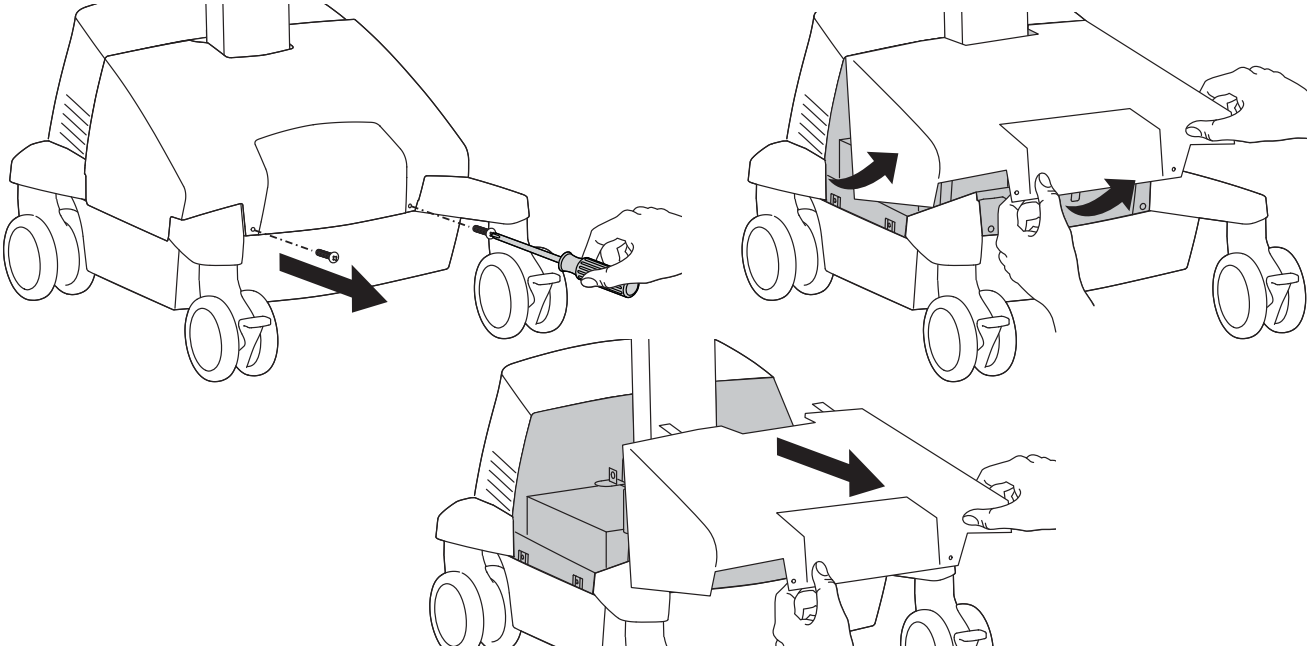4



1 Amp-Sicherung

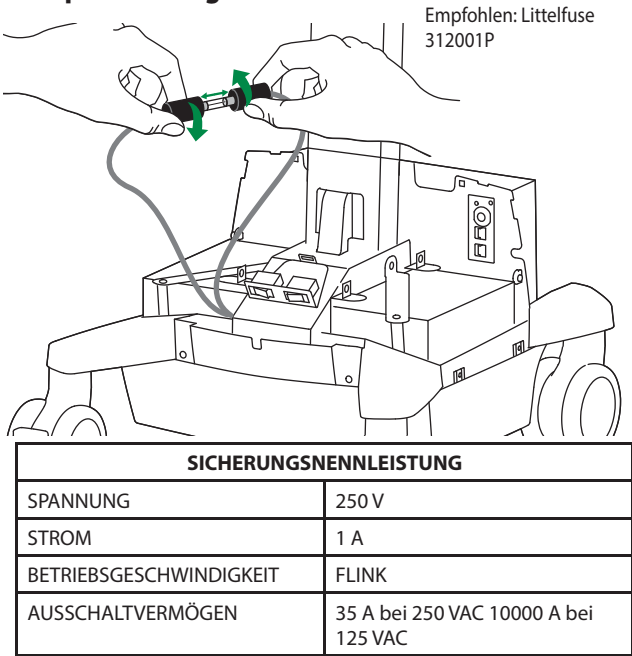


Empfohlen: Littelfuse 312001P

SICHERUNGSNENNLEISTUNG


SPANNUNG	250 V
STROM	1 A
BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT	FLINK
AUSSCHALTVERMÖGEN	35 A bei 250 VAC 10000 A bei 125 VAC

5

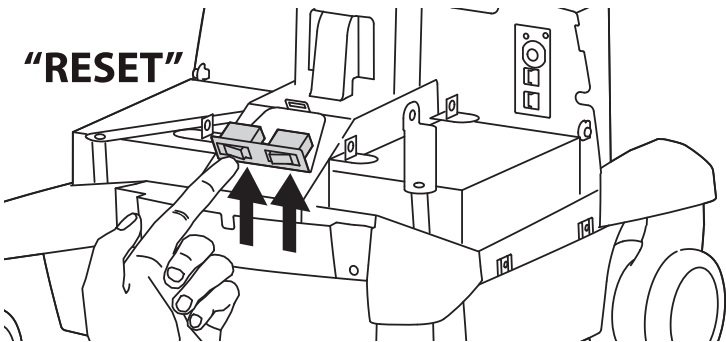Wenden Sie sich an Ergotron, um die Ursache für die Stromunterbrechung zu bestimmen, bevor Sie die Stromunterbrecher zurücksetzen.



6

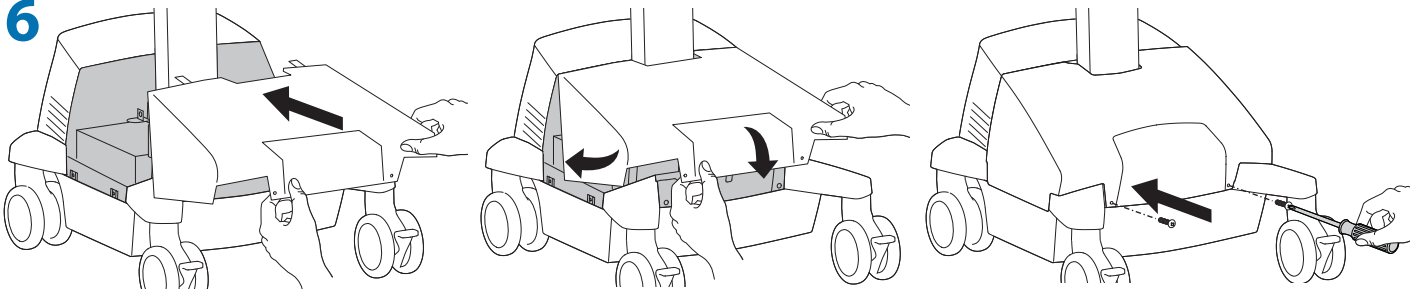



## ⚠️ WARNUNG: ENTLADUNGSRISIKO

- Vertauschen Sie **KEINESFALLS** die Batteriekabel. Dies könnte zu Funkenbildung führen und den Stromunterbrecher aktivieren.
- Die Batterien dürfen nicht in einer sauerstoffreichen oder gefährlichen Umgebung entfernt oder ausgetauscht werden. Dies kann zu Funkenbildung und somit zu Verbrennungen führen.
- Ersetzen Sie den ersten Akku, bevor Sie den zweiten Akku entfernen. Dadurch verringern Sie das Risiko einer Berührung zwischen Klemmen und Kabeln und daher einer Funkenbildung.
- Wechseln Sie immer beide Batterien aus!
- Ersetzen Sie zunächst die erste Batterie und entfernen Sie dann die zweite Batterie.
- Ersetzen Sie sie nur durch Batterien mit den gleichen Ampere-Werten.
- Für die StyleView Stromversorgung dürfen nur von Ergotron zugelassene Batterien eingesetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Ergotron-Kundendienst.
- Führen Sie die Batterie dem Recycling zu, oder informieren Sie sich bei Ergotron über die Richtlinien zur korrekten Batterieentsorgung.



## ⚠️ WARNUNG

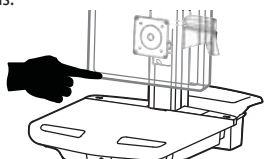
### WICHTIGE INFORMATIONEN ZU ERSATZBATTERIEN

Das Leistungsmodul ist für zwei 33-Ah-Batterien ausgelegt. Nur die folgenden Batterien sind mit diesem System kompatibel.


- B&B EP33-12
- SBS S-12330
- Longway 6FM33G
- Vision 6FM33D
- PBQ PBQ33-12L
- Werker WKA12-33C • Werker WKA12-35C

Durch das Einsetzen von anderen als den oben aufgelisteten 33-Ah-Batterien erlischt die Produktgarantie. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Schäden an den Batterien und am Leistungsmodul sowie zu Brandgefahr führen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Ergotron-Kundendienst unter +1-800-888-8458.


**1 a** Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.



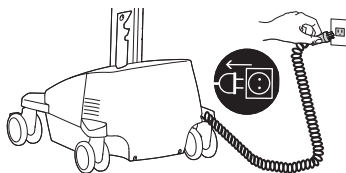
**b** Trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle.



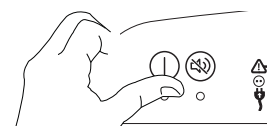**c** Schalten Sie die Stromversorgung ab, indem Sie den Hauptschalter 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Betriebs-LED erlischt.




**2 a**

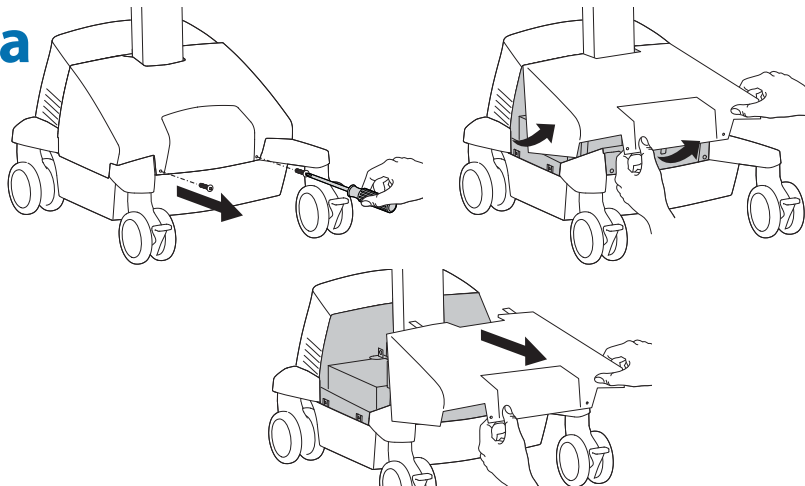


**b** Setzen Sie beide Stromunterbrecher auf "AUS".

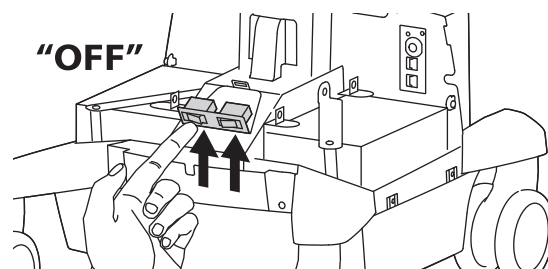
"OFF"



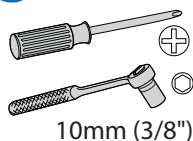
**3 ⚠️** Vorsicht: Vertauschen Sie **NICHT** die Batteriekabel. Dies könnte zu Funkendurchschlag führen und den Stromunterbrecher aktivieren.



**a**

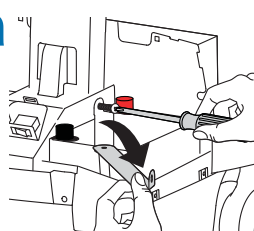


**b**

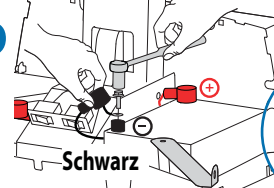


⚠️ Vorsicht: Entfernen Sie erst die schwarze (negative) Zuleitung vor der roten (positiven) Zuleitung.

**c**

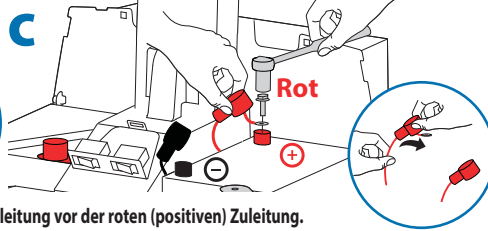


**d**

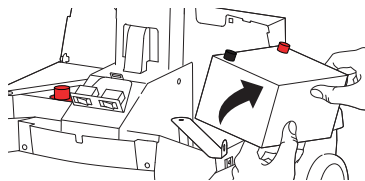


Führen Sie die Batterie dem Recycling zu, oder informieren Sie sich bei Ergotron über die Richtlinien zur korrekten Batterieentsorgung.


**e**

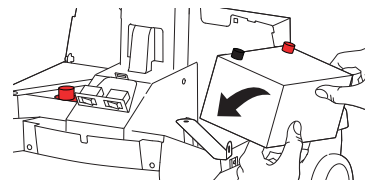


**f**

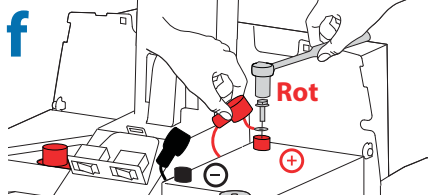

**g**

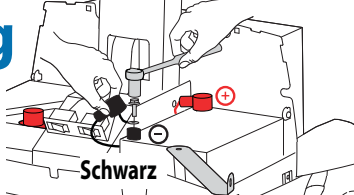






**h**

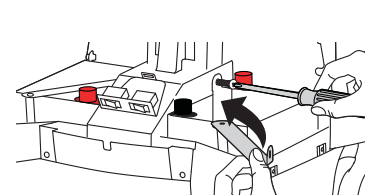

⚠️ Vorsicht: Schließen Sie die rote (positive) Zuleitung vor der schwarzen (negativen) Zuleitung an.

## Batterien des Stromversorgungssystems wechseln

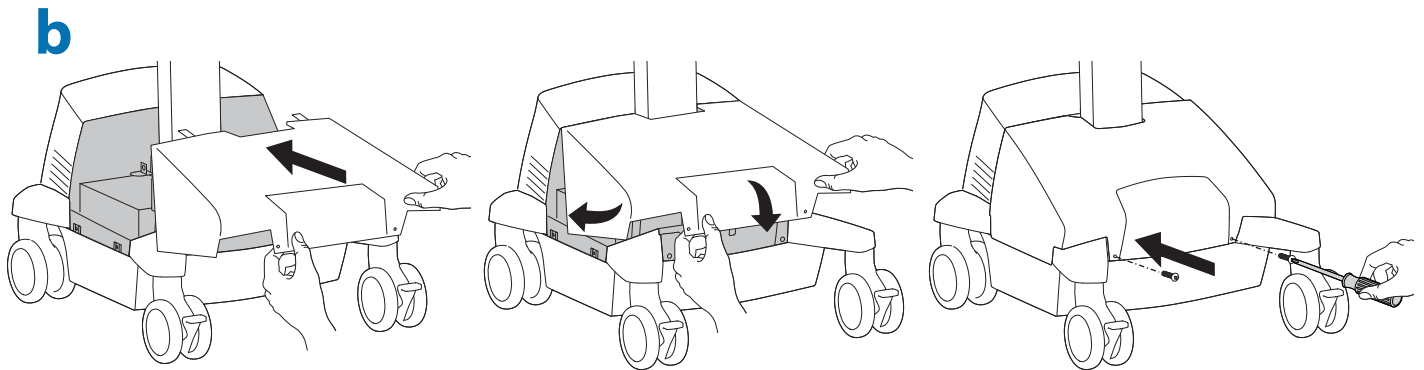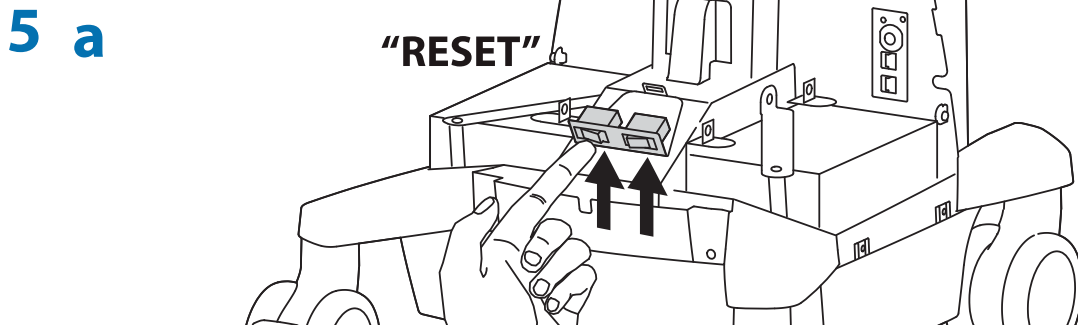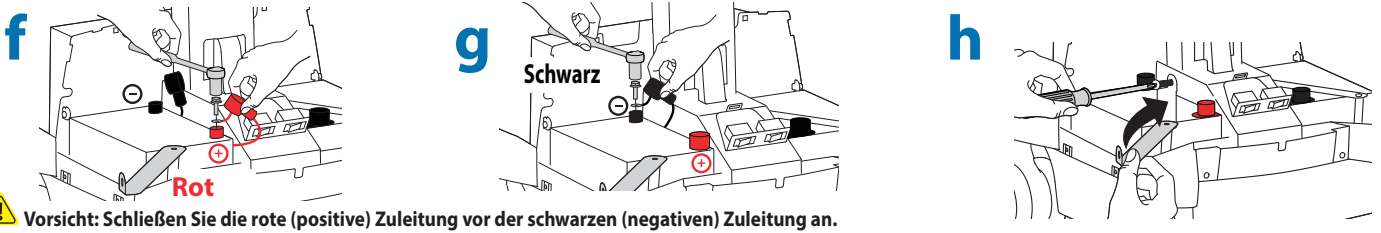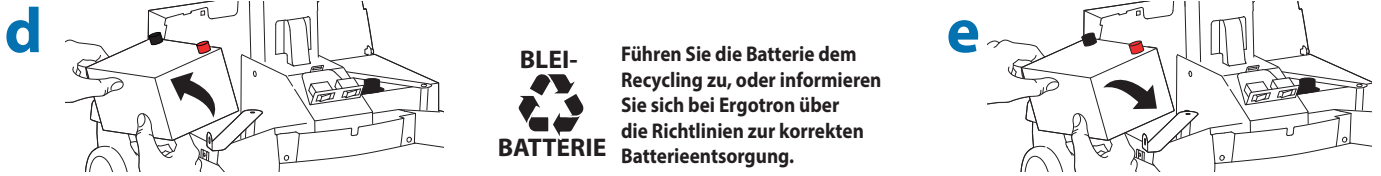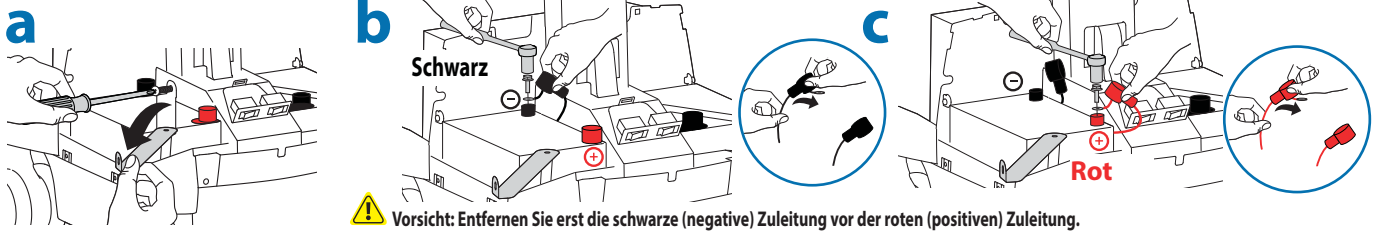- 4** ⚠ Vorsicht: Ersetzen Sie jeweils nur eine Batterie. Vertauschen Sie NICHT die Batteriekabel. Dies könnte zu Funkenflug führen und eine Sicherung auslösen.



- 6** Befolgen Sie die Anleitung für die Erste Inbetriebnahme/Batterieaufladung/-entladung in den Schritten a, b, c.




## Computerwagen-Lagerung

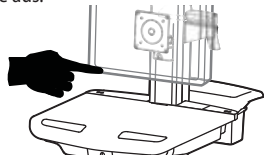**Kurzfristige Lagerung** - Wenn das Stromversorgungssystem bis zu drei Monate lang nicht genutzt wird, sollte die Batterie vor der Lagerung voll aufgeladen werden.


**Langfristige Lagerung** - Wenn das Stromversorgungssystem 3 Monate oder länger nicht genutzt wird, sollte die Batterie aus dem Computerwagen entfernt und während der Lagerung aufgeladen werden.

**Kurzfristige Lagerung** - Wenn das Stromversorgungssystem bis zu drei Monate lang nicht genutzt wird, sollte die Batterie vor der Lagerung voll aufgeladen werden.

- 1** Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.




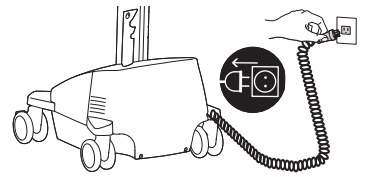- 2** Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose, um die Batterie vollständig auf 100% aufzuladen (alle LEDs auf dem Bedienfeld leuchten auf). Vor dem Lagern muss das Stromversorgungssystem voll aufgeladen sein!




- 3** Schalten Sie das Power System aus, sobald die Batterie zu 100% geladen ist.  
a. Schalten Sie das Power System ein, indem Sie die Netztaaste 1-3 Sekunden lang gedrückt halten.  
b. Setzen Sie beide Stromunterbrecher auf "AUS".

**a**

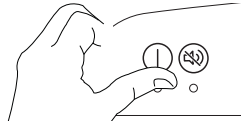

**b**

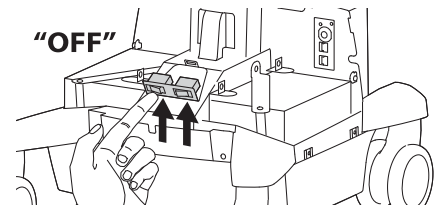"OFF"




**HINWEIS:**

Bei vollständig aufgeladenen Batterien, die mehr als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht genutzt werden, ist die Garantie automatisch nichtig.  
Bei vollständig entladenen Batterien, die mehr als drei (3) aufeinander folgende Tage nicht genutzt werden, ist die Garantie automatisch nichtig.


**Langfristige Lagerung** - Wenn das Stromversorgungssystem 3 Monate oder länger nicht genutzt wird, sollte die Batterie aus dem Computerwagen entfernt und während der Lagerung aufgeladen werden.

**⚠️ WARNUNG:** Die Batterien dürfen nicht in einer sauerstoffreichen oder gefährlichen Umgebung entfernt oder ausgetauscht werden. Es besteht die Gefahr von Funkenflug.

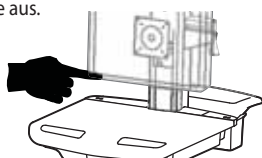
- 1** Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.



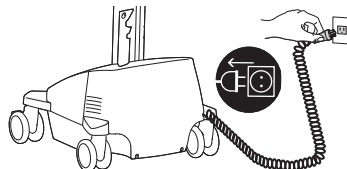
- 2** Trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle.



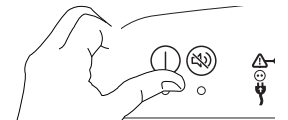- 3** Schalten Sie die Stromversorgung ab, indem Sie den Hauptschalter 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Betriebs-LED erlischt.




**4**

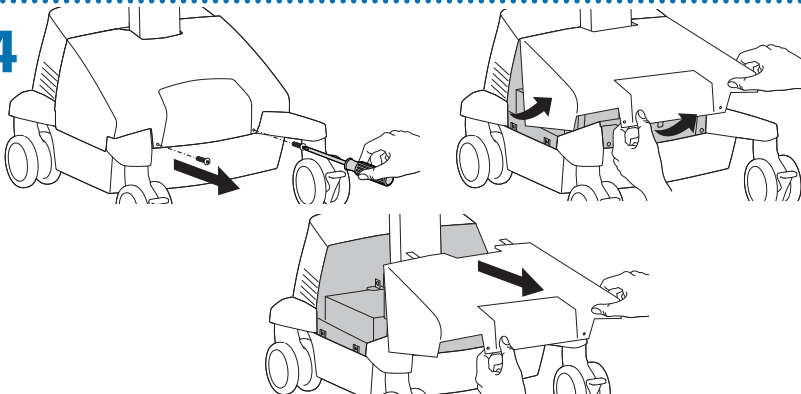

**5**

Setzen Sie beide Stromunterbrecher auf "AUS".

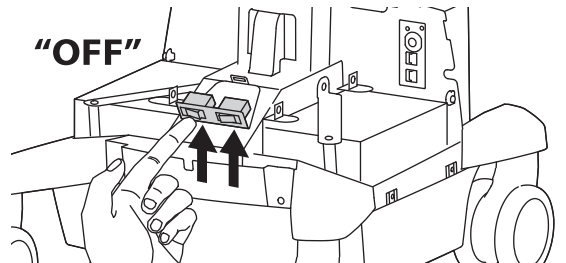
"OFF"




**Vorsicht:** Entfernen Sie erst die schwarze (negative) Zuleitung vor der roten (positiven) Zuleitung.

**6**

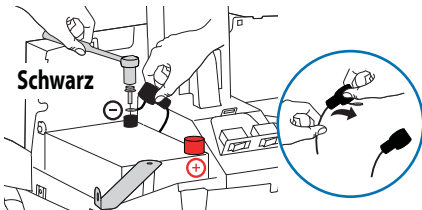Schwarz




**7**

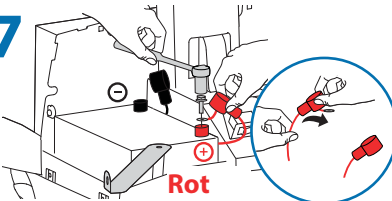

Rot



**8**

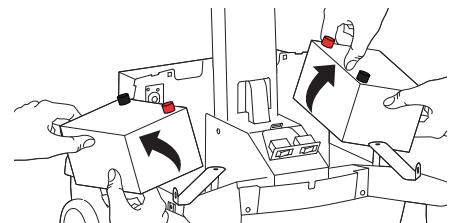

**9**

Lagern Sie die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort, solange der Computerwagen nicht benutzt wird. Die optimale Lagerungstemperatur liegt bei 15 °C/59 °F. Die Spannung der Batterie sollte alle drei (3) Monate überprüft werden. Wenn die Spannung unter 12,5 V~ abfällt, laden Sie die Batterie wieder vollständig auf. Weitere Informationen zum Einfluss der Lagerung auf die Garantie der Batterie erhalten Sie beim Ergotron-Kundendienst.

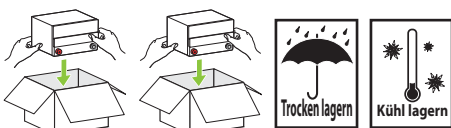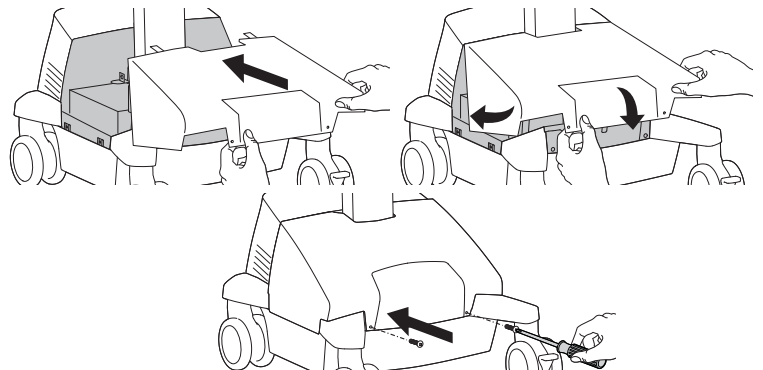
**10**



Arbeiten

Einstellen auf Ihre Größe

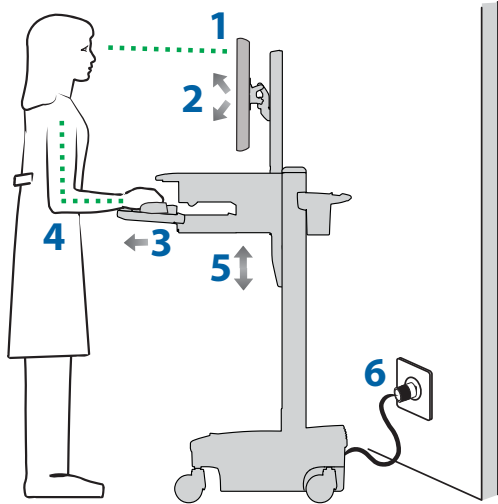
- 1 Stellen Sie den oberen Rand des Bildschirms etwa 2,5 cm unter Ihrer Augenhöhe ein: Lösen Sie die Bremse, und stellen Sie die Höhe nach Ihren Bedürfnissen ein.
- 2 Neigen Sie den Bildschirm in einem für Sie bequemen Winkel, und verhindern Sie so eine Überanstrengung Ihrer Augen und Ihres Nackens.
- 3 Ziehen Sie die Tastaturablage nach vorne, und platzieren Sie die Mousablage und die Maushalterung je nach Bedarf rechts oder links.
- 4 Arbeiten Sie mit bei etwa 90° angewinkelten Ellenbogen, um eine Verspannung der Muskeln zu verhindern.
- 5 Wenn die Höhenverstellung sich nur schwer auf und ab bewegen lässt oder nicht in der eingestellten Position verbleibt, lesen Sie sich die Einstellungsanweisungen im Produkthandbuch durch.
- 6 Auf den Ladezustand achten!  
Computerwagen mit Stromversorgung sollten so oft wie möglich an eine Steckdose angeschlossen werden, damit die Batterie geladen bleibt und der Computer funktioniert.



Bewegen

Räumen Sie auf, bevor Sie den Wagen bewegen

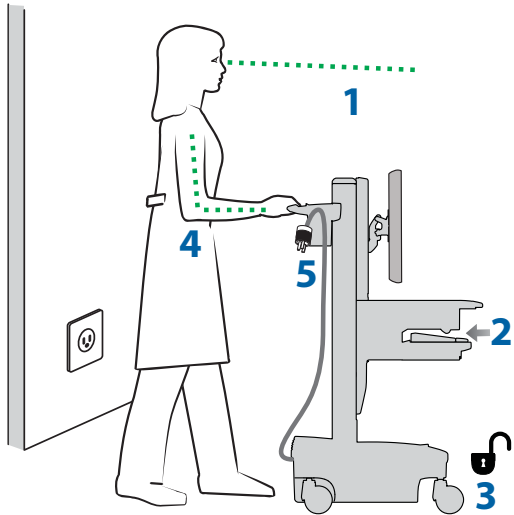- 1 Lösen Sie die Bremse, und senken Sie für eine optimale Stabilität und uneingeschränkte Sicht die Arbeitsfläche auf die niedrigste Position.
- 2 Schließen Sie offene Fächer, und bringen Sie Maus, Scanner und anderes Zubehör wieder an ihre Plätze.
- 3 Entriegeln Sie die beiden vorderen Laufrollen.
- 4 Schieben Sie den Computerwagen an der Rückseite an. Winkeln Sie dabei Ihre Ellenbogen um 90° an, um eine maximale Kontrolle und minimale Muskelbelastung zu erreichen.
- 5 Bewegen Sie sich langsam!  
Bevor Sie den Wagen schieben, überprüfen Sie, ob der Netzstecker gezogen und für eine sichere Fahrt am Korb befestigt ist. Denken Sie daran, die Batterie täglich auf 100% aufzuladen!



Wartung & Sicherheit

Gefahrensymbole

Die Bedeutung der Symbole in diesem Handbuch, auf dem Computerwagen oder auf dem Power System. Diese Symbole weisen Sie auf eine Sicherheitsbedingung hin, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Sie sollten die Bedeutung der folgenden Sicherheitszeichen kennen, wenn Sie sie auf dem Computerwagen oder in der Dokumentation für den Computerwagen, wie in diesem Benutzerhandbuch, sehen.

Symbol	Signalwort/ Farbe	Gefahrenstufe
	<b>GEFAHR</b>	Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder schweren Verletzungen führt.
	<b>WARNUNG</b>	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
	<b>VORSICHT</b>	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichteren Verletzungen führen kann.
	<b>VORSICHT</b>	Wird ohne das Sicherheitszeichen verwendet. Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.
	<b>Anleitung</b>	Beachten Sie die Bedienungsanleitung.
	<b>Anleitung</b>	Beachten Sie die Bedienungsanleitung.
	<b>STROM</b>	EIN/AUS (drücken-drücken) HINWEIS: Beide Positionen (EIN/AUS) sind stabil.



ENTSORGUNG VON GERÄTEN UND ZUBEHÖR

- 1. Entsorgen Sie die Batterien unter Beachtung der lokalen Vorschriften.
- 2. Alle Elektronikkomponenten sollten den örtlichen Vorschriften gemäß dem Recycling zugeführt werden.
- 3. Kunststoff- und Metallreste können von einem gewerblichen Recyclingbetrieb recycelt werden.

## Wartung & Sicherheit



### Reinigung und Wartung

Die folgenden Maßnahmen können ein Infektionsrisiko nicht garantiert ausschließen. Sie sollten den Beauftragten für Infektionskontrolle des Krankenhauses oder einen Epidemiologen hinzuziehen, um die Reinigungsmaßnahmen und -prozesse abzuklären.



Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, setzen Sie elektrische Geräteteile nicht Wasser, Reinigungslösungen oder anderen möglicherweise korrosiven Flüssigkeiten oder Stoffen aus.



Tauchen Sie den Computerwagen oder Teile des Computerwagens nicht in Flüssigkeiten, und lassen Sie keine Flüssigkeiten über ihn laufen. Wischen Sie alle Reinigungsmittel umgehend mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche ab. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich ab.



Verwenden Sie wegen der Nähe zu elektrischem Strom und Zubehör keine brennbaren Reinigungsmittel auf den Oberflächen des Computerwagens.

Alle Lackierungen und Plastikteile des Computerwagens können mit normalen, verdünnten, nicht scheuernden Reinigungslösungen wie quartären Ammoniakverbindungen, Ammoniakenzymreinigern, Bleichen oder Alkohollösungen gereinigt werden, ohne Schaden zu nehmen.

• Flecken von Kugelschreibern, Permanentmarkern und Trockenmarkern können mit 91%-igem Isopropylalkohol und einem weichen Tuch entfernt werden.

• Jodflecken können mit Allzweckreiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

• Verwenden Sie niemals Stahlwolle oder scheuernde Materialien, die die Oberflächenversiegelung angreifen.

• Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie Trichlorethylen oder Aceton. Derartige Lösungsmittel greifen die Oberflächenversiegelung an.

Es wird empfohlen, jede Reinigungslösung auf einem kleinen, unauffälligen Bereich zu testen um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen entstehen.



Einstellung, Reparatur, Austausch - Versuchen Sie NICHT, Komponenten des StyleView Computerwagens einzustellen, zu reparieren oder auszutauschen, wenn Sie keine von Ergotron freigegebene Dokumentation (z.B.

Installationsanweisungen) vorliegen haben. Nur Ergotron, Inc. oder eine von Ergotron ermächtigte Partei darf Komponenten des StyleView Computerwagens einstellen, reparieren oder austauschen. Wenn eine Komponente des Computerwagens fehlt oder beschädigt ist, darf der Computerwagen nicht verwendet werden. Setzen Sie sich in diesem Falle umgehend mit dem Ergotron-Kundendienst in Verbindung, und fordern Sie einen Ersatz für das betreffende Teil an.



Kabel - Halten Sie die Kabel auf dem Computerwagen ordentlich organisiert (zu diesem Zweck bietet Ihnen Ihr Computerwagen verschiedene Lösungen an). Überschüssige Kabellängen können mit Kabelklammern von beweglichen Teilen ferngehalten werden. Lesen Sie sich den Abschnitt zur Kabelverlegung in diesem Handbuch noch einmal durch, oder setzen Sie sich mit dem Ergotron-Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.



Laufrollen - Überprüfen Sie die Laufrollen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sauber sind und nicht von Fremdkörpern behindert werden. Vermeiden Sie es, den Computerwagen über unebene, verschmutzte oder beschädigte Oberflächen zu bewegen.



Kundenzubehör - Stellen Sie sicher, dass die Geräte gut ausbalanciert und sicher am Computerwagen befestigt sind. Verschieben Sie die Computerwagen-Komponenten auf der Höhenverstellung oder dem Gestell nur, wenn Sie in den Installationsanleitungen dazu aufgefordert werden. Wenn Computerwagen-Komponenten auf der Höhenverstellung zu weit nach oben oder unten verschoben werden, kann die Stabilität beeinträchtigt werden, was wiederum zu Geräteschäden oder Verletzungen führen kann. Weitere Informationen zur Verschiebung von Computerwagen-Komponenten erhalten Sie beim Ergotron-Kundendienst.

## Sicherheitshinweise für dieses Produkt

Die folgenden Warnungen/Hinweise finden Sie in diesem Handbuch oder am Computerwagen:

HINWEIS: Eine Missachtung dieser Richtlinien kann Geräteschäden oder Verletzungen zur Folge haben.



VORSICHT: Die Lift-Bremse hilft Ihnen bei der Stabilisierung der Arbeitsfläche und der Tastaturablage während der normalen Benutzung, sie ermöglicht aber KEINE zusätzliche Belastung. Die Höhenverstellung darf NICHT mit Geräten beladen werden, deren Gewicht höher ist als das in den Spezifikationen von Ergotron angegebene Höchstgewicht. Sorgen Sie für eine optimale Lift-Funktion, indem Sie Tests durchführen und bei Bedarf die Spannung anpassen, sobald sich das an der Höhenverstellung befestigte Gewicht ändert (d. h. wenn Geräte entfernt oder hinzugefügt werden). Siehe Anweisungen „Einstellen der Lift-Spannung des Risers“.



VORSICHT: Verwenden Sie den StyleView Computerwagen nicht, wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind! Entfernen, verändern oder ersetzen Sie keine Computerwagen-Komponenten, ohne vorher Ergotron zu Rate zu ziehen. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Bedienung des Computerwagens haben, setzen Sie sich mit dem Ergotron-Kundendienst in Verbindung.



VORSICHT: Ziehen Sie die Verschlüsse NICHT zu fest an. Durch zu festes Anziehen können Ihre Geräte beschädigt werden.



WARNUNG: Gefährdung durch gespeicherte Energie: Der Lift-Mechanismus der Arbeitsfläche steht unter Spannung und wird sich von allein und schnell nach oben bewegen, sobald das befestigte Gerät abgenommen wird. Entfernen Sie aus diesem Grund die Geräte nur, wenn die Arbeitsfläche auf die höchste Position eingestellt wurde! Die Missachtung dieser Anweisung kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder Beschädigungen am Gerät führen. Beim Versand dieses Computerwagens muss der Lift-Mechanismus der Arbeitsfläche auf die niedrigste Spannung eingestellt sein.



VORSICHT: Sie sollten KEINE anderen Muttern oder Schrauben an der Höhenverstellung oder der Oberseite des Gestells lösen, festziehen oder entfernen. Eine Manipulation an Schrauben oder Muttern kann dazu führen, dass der Computerwagen instabil wird und demzufolge Geräteschäden und/oder Verletzungen verursachen.



VORSICHT: Lösen Sie die Lift-Bremse, bevor Sie die Arbeitsfläche bewegen! Wenn Sie die Arbeitsfläche bewegen, ohne die Lift-Bremse zu entriegeln, kann der Lift-Antrieb schwer beschädigt werden.



WARNUNG: Sollte eine Reparatur des StyleView Computerwagens erforderlich sein, wenden Sie sich sofort an den Ergotron-Kundendienst. Reparaturen am Computerwagen dürfen nur von Ergotron, Inc. oder einem von Ergotron bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden.



WARNUNG: Dieser Wagen ist nicht für den Einsatz in einer entzündlichen, Narkosegemisch- oder sauerstoffreichen Umgebung geeignet.

## Konfiguration und Sicherheit



An das medizinische System dürfen keine weiteren Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel angeschlossen werden.



Bei einer Verwendung im Rahmen eines medizinisch-elektrischen Systems dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die den Anforderungen der für das betreffende Gerät relevanten IEC-, ISO-, UL/ANSI- oder CSA-Standards entsprechen.



Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr, wenn als Teil eines Systems gelieferte nicht medizinische Geräte direkt an der Wandsteckdose angeschlossen werden, wenn diese nicht medizinischen Geräte von der Mehrfachsteckdose mit Strom versorgt werden sollen.



Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr, wenn Geräte, die nicht als Teil des medizinischen Systems geliefert wurden, an der Mehrfachsteckdose angeschlossen werden.

DE

888-24-212-G-00 rev. C• 11/12

1. Trennen Sie den Wagen von der Stromversorgung (ziehen Sie den Stecker des Wagens aus der Wandsteckdose).
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung aus den internen Steckdosen, indem Sie den Hauptschalter am Power System-Bedienfeld betätigen.
3. Bereiten Sie die Isolationswiderstandsprüfung gemäß den Anweisungen der Sicherheitsprüfvorrichtung für medizinische Geräte vor.
4. Schließen Sie das Netzkabel des Wagens an die Sicherheitsprüfvorrichtung für medizinische Geräte an.
5. Führen Sie den Test durch (500 V).
6. Vergewissern Sie sich, dass der Isolationswiderstand höchstens 1 MOhm beträgt.
7. Trennen Sie die Verbindungen zwischen Sicherheitsprüfvorrichtung für medizinische Geräte und Wagen, und nehmen Sie den Wagen wieder in Betrieb.



Richtlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Emissionen		
Der Computerwagen mit Stromversorgung ist für die Verwendung in der oben erläuterten elektronmagnetischen Umgebung geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des Computerwagens mit Stromversorgung sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.		
Emissionstest	Einhaltung	Richtlinie – elektromagnetische Umgebung
Radiowellen-Emission CISPR (Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen) 11	Gruppe 1	Der Computerwagen mit Stromversorgung nutzt nur für die internen Funktionen RF-Energie. Daher sind die Radiowellen-Emissionen sehr gering und verursachen eher keine Interferenzen mit nahe gelegenen Geräten.
Radiowellen-Emission CISPR (Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen) 11	Klasse A	
Oberwellenstrahlung IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen/ Flicker IEC 61000-3-3	Trifft zu	

Richtlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
Der Computerwagen mit Stromversorgung ist für die Verwendung in der oben erläuterten elektronmagnetischen Umgebung geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des Computerwagens mit Stromversorgung sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.			
Verträglichkeitstest	IEC 60601 Testebene	Einhaltung	Richtlinie – elektronmagnetische Umgebung
Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	gewährleistet	Der Untergrund sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Ist der Boden mit synthetischem Material bedeckt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-3	±2 kV für die Stromversorgungsleitungen ±1 kV für die Ein-/Ausgangsleitungen	gewährleistet	Die Qualität der Stromversorgung muss einer normalen Geschäfts- bzw. Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannung IEC 61000-4-5	±1 kV Gegentakt ±2 kV Gleichtakt	gewährleistet	Die Qualität der Stromversorgung muss einer normalen Geschäfts- bzw. Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf den Stromversorgungs-Eingangsleitungen. IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen 40% UT (>60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70% UT (>30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Zyklen	gewährleistet	Die Qualität der Stromversorgung muss einer normalen Geschäfts- bzw. Krankenhausumgebung entsprechen.
Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	gewährleistet	Magnetische Stromfrequenzfelder sollten sich auf einem für normale Geschäfts- bzw. Krankenhausumgebungen typischen Niveau befinden.
Hinweis: U <sub>T</sub> ist die AC-Netzspannung vor dem Einsatz auf Testniveau.			

Vertrieb Deutschland, Österreich und Schweiz	Vertrieb in Europa, Naher Osten, Afrika	Vertriebs- und Konzernhauptszitz in Amerika
Maria-Merian-Strasse 9 24145 Kiel Deutschland +49 431 71 885-0 www.ergotron.com info@ergotron.de	Amersfoort, Niederlande +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.de	1181 Trapp Rd. St. Paul, MN USA (800) 888-8458 +1-651-681-7600 www.ergotron.com sales@ergotron.com



© 2013 Ergotron, Inc.  
All rights reserved.

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst. Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.